

---

广东省分析测试协会团体标准

美白祛斑化妆品中 14 种植物提取物的鉴别及含量测定  
高效液相色谱-串联质谱法（征求意见稿）  
编制说明

《美白祛斑化妆品中 14 种植物提取物的鉴别及含量测定  
高效液相色谱-串联质谱法》编制组

2024 年 6 月

---

# 目 录

一、 本标准制定的背景、目的与意义 .....	1
二、 工作简况 .....	1
2.1 任务来源.....	1
2.2 主要工作过程.....	2
2.2.1 标准初稿的起草.....	2
2.2.2 标准计划立项 .....	2
2.2.3 征求意见稿的起草 .....	2
2.2.4 标准的征求意见.....	3
三、 本标准与国内外标准关系的说明 .....	3
四、 标准编制原则和主要内容 .....	4
4.1 标准编制原则.....	4
4.2 标准主要内容的依据.....	5
4.3 标准的技术路线和主要内容.....	5
4.3.1 主要技术路线 .....	5
4.3.2 主要内容 .....	5
4.4 解决的主要问题.....	26
4.5 修订标准时应列出与原标准的主要差异和水平对比 .....	27
五、 主要试验（或验证）情况分析、综述结论 .....	27
5.1 基本情况.....	27
5.2 机构 A 试验分析.....	27
5.2.1 专属性.....	27
5.2.2 基质效应 .....	30
5.2.3 检测限及定量限.....	30
5.2.4 线性及线性范围 .....	32
5.2.5 回收率和精密度 .....	36
5.2.6 实际样品测定 .....	40
5.3 机构 B 试验分析.....	41
5.3.1 检测限及定量限.....	41

---

5.3.2 线性及线性范围.....	43
5.3.3 回收率和精密度.....	47
5.4 机构 C 试验分析.....	51
5.4.1 检测限及定量限.....	52
5.4.2 线性及线性范围.....	54
5.4.3 回收率和精密度.....	57
5.5 机构 D 试验分析.....	62
5.5.1 检测限及定量限.....	62
5.5.2 线性及线性范围.....	64
5.5.3 回收率和精密度.....	68
六、标准中涉及专利的情况.....	72
七、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况.....	72
八、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性.....	72
九、重大分歧意见的处理经过和依据.....	72
十、标准性质的建议说明.....	72
十一、贯彻标准的要求和措施建议.....	73
十二、废止现行相关标准的建议.....	73
十三、其他应予说明的事项.....	73

---

## 一、本标准制定的背景、目的与意义

我国中草药资源丰富，中医药理论底蕴深厚而历史悠久，随着化妆品市场的不断完善，含药用植物提取物类原料的化妆品迎来了新的机遇和发展。植物提取物作为原料应用于美白祛斑化妆品也越来越广泛。植物提取物发挥作用的是其中的功效化学成分，但目前对植物提取物中功效化学成分的鉴定、检测以及质量标准研究相对较少，对化妆品成品中植物提取物的研究更少，缺乏相应的质控方法和标准。化妆品标签上标识的植物提取物多种多样，但实际是否有添加或者添加的量是多少，缺乏数据支撑；标准的缺失也使得政府部门无法监管，因此，开展美白祛斑化妆品中添加植物提取物的研究，建立美白祛斑化妆品植物提取物的鉴别及含量检测方法及标准势在必行。

该项目着力研究具有美白祛斑效果的植物提取物，并选择了 14 种代表性植物提取物，分别为人参提取物、丹参提取物、甘草提取物、葛根提取物、当归提取物、虎杖提取物、积雪草提取物、金银花提取物、芦荟提取物、苦参提取物、蒲公英提取物、桑叶提取物、山楂叶提取物以及芍药提取物。每种植物提取物选择具有代表性的 3 个以上特征标识组分作为定性指标，并选择其中一个组分作为定量指标。

本项目所建立的标准，采用高效液相色谱-串联质谱法测定美白祛斑化妆品中植物提取物特征标识组分，并建立植物提取物的鉴别及含量测定的测定方法，为美白祛斑化妆品质量控制提供可靠检测方法的同时也保障了化妆品的安全、稳定、有效，对推动化妆品产业高质量发展具有非常重要的意义。另外新政策下的化妆品功效评估，是未来化妆品上市前必备的内容，目前功效评估这项工作价格贵、周期长，企业需付出的成本高，为了避免浪费成本，首先控制好功效物质，再做相应的功效评价，可以保证评价试验通过率高，因此美白祛斑化妆品中植物提取物的鉴别及含量测定标准的建立，也将成为企业的需求，为企业节省成本，提高经济效益。

## 二、工作简况

### 2.1 任务来源

广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）承担制定的《美白祛斑化妆品中 14 种植物提取物的鉴别及含量测定 高效液相色谱-串联质谱法》标准，是根据《广东省分析测试协会关于 2022 第一批团体标准立项的公告》（粤测协字〔2022〕16 号），项目批文号为：粤测协字发〔2022〕16 号，项目计划编号为：GAIA/JH20220104，任务

---

书起止时间为：2022 年 12 月至 2023 年 11 月。

## **2.2 主要工作过程**

### **2.2.1 标准初稿的起草**

2022 年 4 月至 2022 年 5 月，标准负责起草单位查阅大类文献与资料，了解国内外相关分析方法的研究开展情况、相关质量标准，并在文献资料调研的基础上确定了本标准制定拟采用的原则、方法和技术依据，确定了本标准的适用范围，且本标准适用于我国大部分监测实验室和相关实验室的仪器设备、技术能力的要求。在上述工作的基础上，标准负责起草单位技术人员采用实际样品，经过实验室试验，建立了美白祛斑化妆品中 14 种植物提取物的鉴别及含量测定 高效液相色谱-串联质谱法，并起草了标准文本的初稿。2022 年 5 月，标准负责起草单位将完成的标准初稿和标准计划项目书提交至广东省分析测试协会。

### **2.2.2 标准计划立项**

在 2022 年 10 月由广东省分析测试协会组织召开的团体标准立项评估会上，该项目顺利通过专家质询，由广东省分析测试协会批准立项。根据《广东省分析测试协会关于 2022 第一批团体标准立项的公告》（粤测协字〔2022〕16 号），《美白祛斑化妆品中 14 种植物提取物的鉴别及含量测定 高效液相色谱-串联质谱法》计划项目编号为 GAIA/JH20220104，计划完成时间为 2023 年 11 月。

### **2.2.3 征求意见稿的起草**

2022 年 12 月~2023 年 4 月，成立标准编制小组，并制定本标准研究的技术路线。针对具有美白祛斑效果的植物提取物进行研究，并确定 14 种代表性植物提取物。每种植物提取物选定具有代表性的 3 个以上特征标识组分作为定性指标，并选择其中一个组分作为定量指标。

2023 年 5 月至 8 月对方法的技术参数进行了研制，包括前处理方法、色谱条件、质谱条件等参数进行优化，最终确定实验参数。

2023 年 9 月至 12 月建立了高效液相色谱-串联质谱法测定美白祛斑化妆品中植物提取物特征标识组分，并建立植物提取物的鉴别及含量测定的测定方法。期间开展了方法学验证，所得曲线的线性、精密度以及回收率等均满足定量要求；并组织 3 家有资质检测机构对方法进行验证。

---

2023年12月按标准化工作导则编写标在检验方法和编制说明，并完成《美白祛斑化妆品中14种植物提取物的鉴别及含量测定 高效液相色谱-串联质谱法》（征求意见稿）及编制说明。

2024年2月至6月，广发征集高校、科研院所、企业单位等相关领域的专家意见，针对专家意见反馈的意见，对征求意见稿进行修改，完成《美白祛斑化妆品中14种植物提取物的鉴别及含量测定 高效液相色谱-串联质谱法》（送审稿）及相应的编制说明，并于2024年6月向广东省分析测试协会提交送审申请。

2024年6月，标准编制组根据广东省分析测试协会团标标准的要求对本标准送审稿进行了修改和完善，并完成团体标准送审稿后于2024年6月提交给广东省分析测试协会。

#### 2.2.4 标准的征求意见

2024年2月至6月，标准编制组对《美白祛斑化妆品中14种植物提取物的鉴别及含量测定 高效液相色谱-串联质谱法》团体标准征求意见稿及编制说明进行了意见征求。标准编制组向高校、科研院所、企业单位等相关领域的16名专家征求了意见，主要领域涉及分析检测、化妆品、化工、医药、生物等，征求单位包括广州海关技术中心、广州质量监督检测研究院、广州汇标检测技术中心、广东省标准化研究院、广东省药品检验所、广州市药品检验所、广东药科大学、广州市微生物研究所集团股份有限公司、广州科盈化妆品公司、迪爱品牌管理有限公司、丸美公司、中山完美公司、无限极公司、广东三好科技、省审评认证协会以及广州逸仙电子商务有限公司。截止到2024年6月，共征集意见22条，其中文本意见为21条，技术意见为1条。征求意见采纳19条，不采纳0条，部分采纳3条。根据回函处理情况，标准编制组对《美白祛斑化妆品中14种植物提取物的鉴别及含量测定 高效液相色谱-串联质谱法》征求意见稿及编制说明进行了修改。

2024年6月向广东省分析测试协会提交标准送审稿。

### 三、本标准与国内外标准关系的说明

目前国内虽有部分针对化妆品用植物提取物原料的标准，但针对化妆品成品中植物提取物的鉴别及含量检测标准没有。化妆品中添加植物提取物的应用越来越广泛，因此急需建立可鉴别及测定化妆品中植物提取物的方法。

现有进出口商检标准如SN/T 3958-2014 进出口植物提取物中总砷、铅、镉、铜含量的测定方法；外经贸标准如WM/T.4-2004 当归提取物；这些标准都只是针对植物提取物原料的检测，没有针对化妆品成品的植物提取物多功效成分的标准。国内已有关于植物

---

提取物类化妆品的标准有：国家标准 GB/T 39665-2020 含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定，标准规定含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的液相色谱-串联质谱（20 种）和气相色谱-质谱（35 种）测定方法，适用于含植物提取物的化妆水、乳液、膏霜和面膜类化妆品。该标准针对的是有害物质的测定。

国内已有关于植物提取物有团体标准：（1）北京日化协会关于发布《化妆品用中国特色植物资源原料目录》及《化妆品用中国特色植物原料研发指南》。本标准规定了化妆品用中国特色植物资源和相关原料的范围，适用于化妆品用中国特色植物资源的遴选，相关原料的研究、开发和应用。（2）中国医药保健品进出口商会发布《植物提取物 黄芪提取物》等 22 项团体标准公告，里面包括了黄芪提取物、桑叶提取物、苦荞麦提取物等等；这些标准规定了植物提取物的标准及质控参数。（3）国家标准 GB/T 37628-2019 化妆品中黄芪甲苷、芍药苷、连翘苷和连翘酯苷 A 的测定 高效液相色谱法；化妆品中阿魏酸含量的测定（T/SHRH 025-2019）规定了化妆品中活性成分阿魏酸的高效液相色谱测定方法。这两标准只针对单一或 4 种成分的测定，未能囊括更多的植物提取物功效成分。且两标准都采用高效液相法，但高效液相法定性抗干扰能力较弱，而化妆品基质复杂，干扰严重，很多时候仍需要其他方法确证。

## 四、标准编制原则和主要内容

### 4.1 标准编制原则

本标准的制定符合产业发展的原则。本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本标准是按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》和 GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第 4 部分：试验方法标准》的要求编写的，并参考了国家食品药品监督管理总局发布的《化妆品中禁用物质和限用物质检测方法验证技术规范》，本标准编制原则包括以下内容：

- （1）建立的标准分析方法能够满足各项方法特性指标的要求；
- （2）方法的检出限和测定范围满足相关标准和监测工作的要求；
- （3）建立的标准分析方法的准确度、精密度方法准确可靠，满足各项方法特性指标的要求；
- （4）建立的标准分析方法符合监测行业人员的技术水平，能被国内主要的分析实

实验室所使用并达到所规定的要求；

(5) 建立的标准分析方法具有普遍适用性，易于推广使用。

另外，标准内容符合国家法律、法规的有关要求，未与已有标准冲突；符合我国标准制修订管理工作规程对编制程序和工作规定和要求；符合标准的科学性、先进性、实用性的要求。

## 4.2 标准主要内容的依据

在按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》和 GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第 4 部分：试验方法标准》的要求编写的，并参考了国家食品药品监督管理总局发布的《化妆品中禁用物质和限用物质检测方法验证技术规范》，确定了本标准的主要内容应包括以下十个部分：范围、规范性引用文件、术语和定义、方法原理、试剂和材料、仪器与设备、分析步骤、结果计算、精密度和准确度、检出限和定量限。

在确定以上十部分具体内容时，首先标准起草小组根据查阅的相关资料和多年的工作经验进行总结，初步拟定了标准草稿。然后向国内分析测试方面的专家和专业技术人员进行咨询，就相关内容进行补充和修正。经认真分析和归纳整理，形成了标准文稿。标准文稿经多次认真讨论，以及详尽的实验验证后，对标准文稿相关内容进行了修改完善。

## 4.3 标准的技术路线和主要内容

### 4.3.1 主要技术路线

主要技术路线图见图 1。

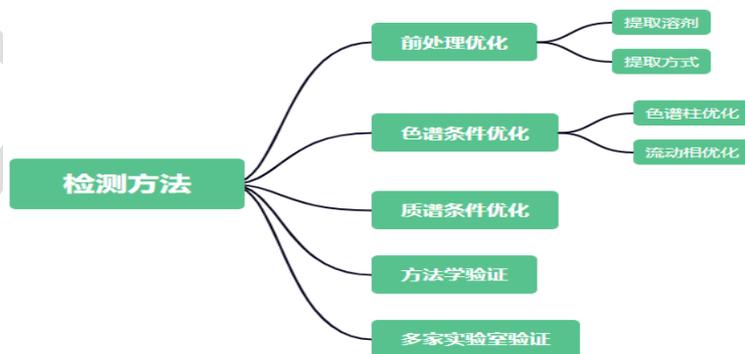


图 1 主要技术路线图

### 4.3.2 主要内容

依据技术路线建立仪器方法，其主要内容包括以下七个部分：植物提取物的选择、特

征标识组分的选择、前处理条件选择、质谱条件的优化、色谱条件的优化、植物提取物鉴别以及植物提取物含量。

#### 4.3.2.1 植物提取物的选择

植物提取物应用到美白祛斑化妆品中已成为研究开发美白祛斑化妆品的热点。以相关标准、书籍、论文为基础，选取具有美白祛斑效果的代表性的植物提取物进行研究，并确定14种代表性植物提取物，分别为人参提取物、丹参提取物、甘草提取物、葛根提取物、当归提取物、虎杖提取物、积雪草提取物、金银花提取物、芦荟提取物、苦参提取物、蒲公英提取物、桑叶提取物、山楂叶提取物以及芍药提取物。

#### 4.3.2.2 特征标识组分的选择

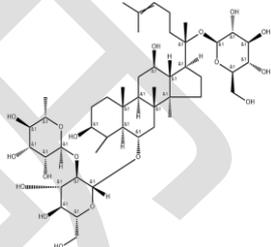
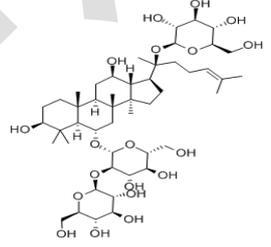
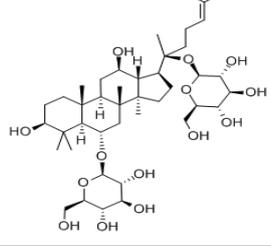
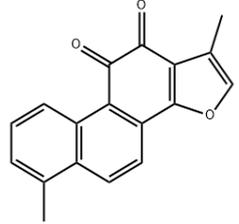
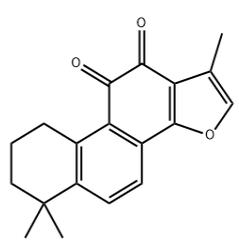
鉴于植物提取物中成分复杂，以相关标准（包括现行版《中国药典》）、书籍、论文为基础，每种植物提取物选定具有代表性的3个以上特征标识组分作为定性指标，并选择其中一个组分作为定量指标，详见表1。43种特征标识组分的分子式、相对分子质量、CAS登录号、化学结构式详见表2。







表 114 种植物提取物名称及标识组分







序号	提取物名称	标识组分名称
1	人参提取物	人参皂苷 Re*、人参皂苷 Rd、人参皂苷 Rg1
2	丹参提取物	丹参酮 I*、丹参酮 IIA、隐丹参酮
3	甘草提取物	甘草酸*、甘草苷、甘草素
4	葛根提取物	染料木素、大豆苷元、葛根素*
5	当归提取物	川芎嗪、阿魏酸*、蒿本内酯
6	虎杖提取物	大黄素、白藜芦醇、虎杖苷*
7	积雪草提取物	积雪草苷*、积雪草苷 B、羟基积雪草苷
8	金银花提取物	异绿原酸 C、异绿原酸 A、绿原酸*
9	芦荟提取物	芦荟苷*、芦荟大黄素、芦荟新苷 D
10	苦参提取物	氧化槐果碱、槐果碱、苦参碱*、氧化苦参碱
11	蒲公英提取物	菊苣酸*、木犀草素、咖啡酸
12	桑叶提取物	槲皮素*、山奈酚、芦丁
13	山楂叶提取物	金丝桃苷*、牡荆素葡萄糖苷、牡荆素鼠李糖苷







序号	提取物名称	标识组分名称
14	芍药提取物	苯甲酰芍药苷、芍药内酯苷、芍药苷*
*为推荐的定量标识组分。		







表2 人参皂苷Re等43种植物提取物标识组分的中文名称、英文名称、CAS号、分子式、  
相对分子质量及结构式







序号	中英文名称	CAS号	分子式	相对分子质量	化学结构式
1	人参皂苷 Re Ginsenoside Re	52286-59-6	C <sub>48</sub> H <sub>82</sub> O <sub>18</sub>	947.17	
2	人参皂苷 Rd Ginsenoside Rd	52705-93-8	C <sub>48</sub> H <sub>82</sub> O <sub>18</sub>	947.17	
3	人参皂苷 Rg1 Ginsenoside Rg1	22427-39-0	C <sub>42</sub> H <sub>72</sub> O <sub>14</sub>	801.01	
4	丹参酮 I Tanshinone I	568-73-0	C <sub>18</sub> H <sub>12</sub> O <sub>3</sub>	276.29	
5	丹参酮 IIA Tanshinone IIA	568-72-9	C <sub>19</sub> H <sub>18</sub> O <sub>3</sub>	294.34	

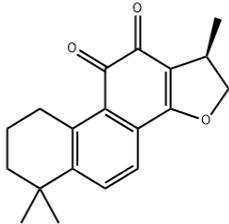
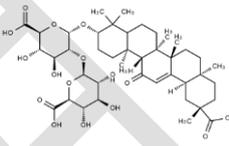
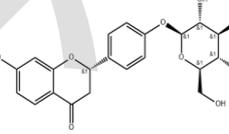
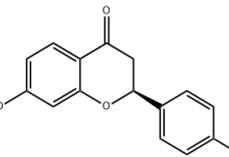
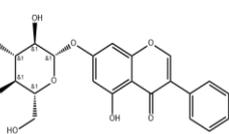
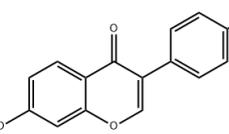
序号	中英文名称	CAS号	分子式	相对分子质量	化学结构式
6	隐丹参酮 Cryptotanshinone	35825-57-1	C <sub>19</sub> H <sub>20</sub> O <sub>3</sub>	296.36	
7	甘草酸 Glycyrrhizic acid	1405-86-3	C <sub>42</sub> H <sub>62</sub> O <sub>16</sub>	822.94	
8	甘草苷 Liquiritin	551-15-5	C <sub>21</sub> H <sub>22</sub> O <sub>9</sub>	418.4	
9	甘草素 Liquirtigenin	578-86-9	C <sub>15</sub> H <sub>12</sub> O <sub>4</sub>	256.25	
10	染料木素 Genistein	446-72-0	C <sub>15</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub>	270.24	
11	大豆苷元 Daidzein	486-66-8	C <sub>15</sub> H <sub>10</sub> O <sub>4</sub>	254.24	

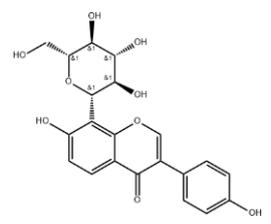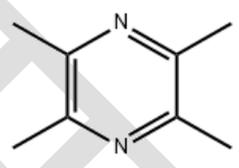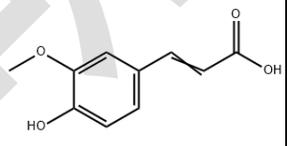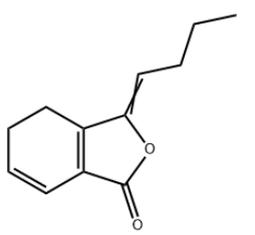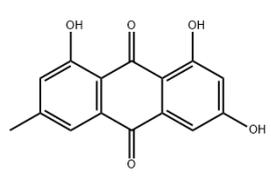
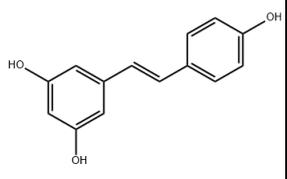
序号	中英文名称	CAS号	分子式	相对分子质量	化学结构式
12	葛根素 Puerarin	3681-99-0	$C_{21}H_{20}O_9$	416.38	
13	川芎嗪 Tetramethylpyrazine	1124-11-4	$C_8H_{12}N_2$	136.19	
14	阿魏酸 Ferulic Acid	1135-24-6	$C_{10}H_{10}O_4$	194.18	
15	蒿本内酯 Ligustilide	4431-01-0	$C_{12}H_{14}O_2$	190.24	
16	大黄素 Emodin	518-82-1	$C_{15}H_{10}O_5$	270.24	
17	白藜芦醇 Resveratrol	501-36-0	$C_{14}H_{12}O_3$	228.24	

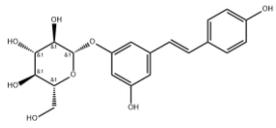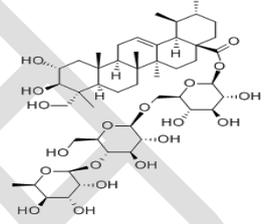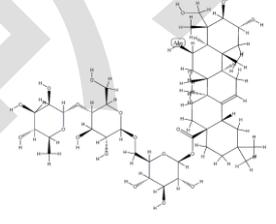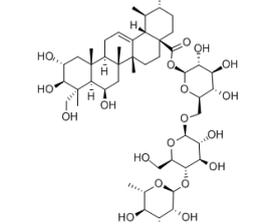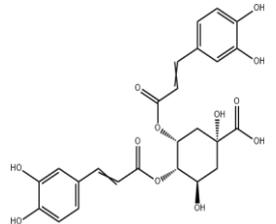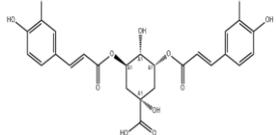序号	中英文名称	CAS号	分子式	相对分子质量	化学结构式
18	虎杖苷 Polydatin	27208-80-6	$C_{20}H_{22}O_8$	390.39	
19	积雪草苷 Asiaticoside	16830-15-2	$C_{48}H_{78}O_{19}$	959.12	
20	积雪草苷 B Asiaticoside B	125265-68-1	$C_{48}H_{78}O_{20}$	975.12	
21	羟基积雪草苷 Madecassoside	34540-22-2	$C_{48}H_{78}O_{20}$	975.12	
22	异绿原酸 C Isochlorogenic acid C	57378-72-0	$C_{25}H_{24}O_{12}$	516.45	
23	异绿原酸 A Isochlorogenic acid A	89919-62-0	$C_{25}H_{24}O_{12}$	516.46	

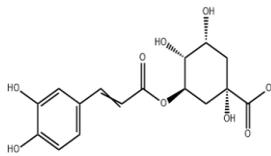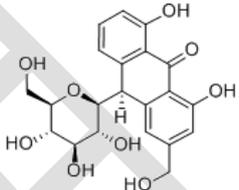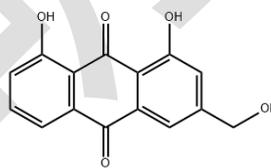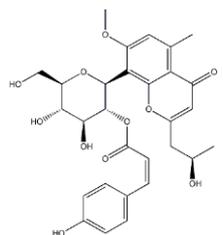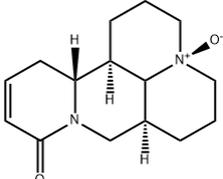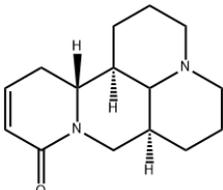序号	中英文名称	CAS号	分子式	相对分子质量	化学结构式
24	绿原酸 Chlorogenic acid	327-97-9	$C_{16}H_{18}O_9$	354.31	
25	芦荟苷 Aloin	1415-73-2	$C_{21}H_{22}O_9$	418.39	
26	芦荟大黄素 Aloe emodin	481-72-1	$C_{15}H_{10}O_5$	270.24	
27	芦荟新苷 D Aloeresin D	105317-67-7	$C_{29}H_{32}O_{11}$	556.56	
28	氧化槐果碱 Oxysophocarpine	26904-64-3	$C_{15}H_{22}N_2O_2$	262.35	
29	槐果碱 Sophocarpine	6483-15-4	$C_{15}H_{22}N_2O$	246.35	

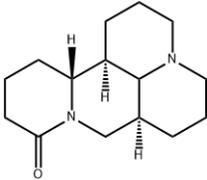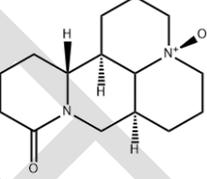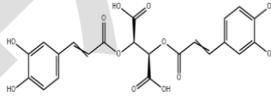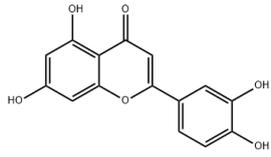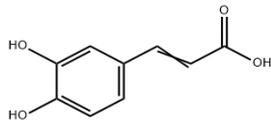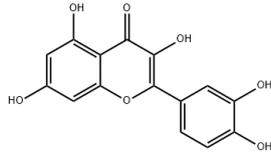序号	中英文名称	CAS号	分子式	相对分子质量	化学结构式
30	苦参碱 Matrine	519-02-8	$C_{15}H_{24}N_2O$	248.36	
31	氧化苦参碱 Ammothamnine	16837-52-8	$C_{15}H_{24}N_2O_2$	264.36	
32	菊苣酸 Chicoric acid	6537-80-0	$C_{22}H_{18}O_{12}$	474.37	
33	木犀草素 Luteolin	491-70-3	$C_{15}H_{10}O_6$	286.24	
34	咖啡酸 Caffeic acid	331-39-5	$C_9H_8O_4$	180.16	
35	槲皮素 Quercetin	117-39-5	$C_{15}H_{10}O_7$	302.24	

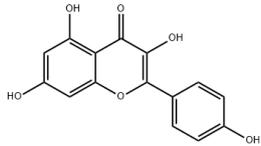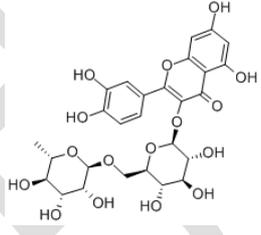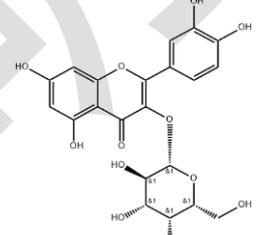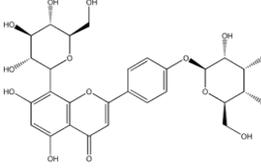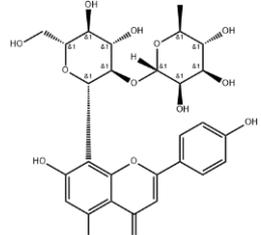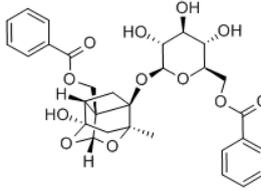序号	中英文名称	CAS号	分子式	相对分子质量	化学结构式
36	山奈酚 Kaempferol	520-18-3	C <sub>15</sub> H <sub>10</sub> O <sub>6</sub>	286.24	
37	芦丁 Rutin	153-18-4	C <sub>27</sub> H <sub>30</sub> O <sub>16</sub>	610.52	
38	金丝桃苷 Hyperoside	482-36-0	C <sub>21</sub> H <sub>20</sub> O <sub>12</sub>	464.38	
39	牡荆素葡萄糖苷 Vitexia-glucoside	38950-94-6	C <sub>27</sub> H <sub>30</sub> O <sub>15</sub>	594.52	
40	牡荆素鼠李糖苷 Vitexin-2-O-rhamnoside	64820-99-1	C <sub>27</sub> H <sub>30</sub> O <sub>14</sub>	578.52	
41	苯甲酰芍药苷 Benzoylpaeoniflorin	38642-49-8	C <sub>30</sub> H <sub>32</sub> O <sub>12</sub>	584.57	

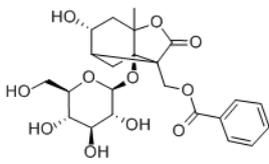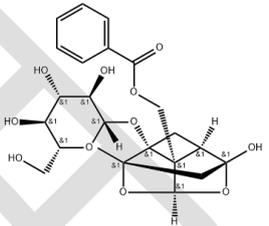序号	中英文名称	CAS号	分子式	相对分子质量	化学结构式
42	芍药内酯苷 Albiflorin	39011-90-0	C <sub>23</sub> H <sub>28</sub> O <sub>11</sub>	480.46	
43	芍药苷 Paeoniflorin	23180-57-6	C <sub>23</sub> H <sub>28</sub> O <sub>11</sub>	480.47	

#### 4.3.2.3 前处理条件选择

本实验前处理条件的优化主要在于提取溶剂的选择。提取溶剂的选择对目标物的提取效果取决于化合物的极性和样品基质的类型。实验涉及到 43 种植物提取物特征标识组分，易溶于甲醇和乙腈等；化妆品基质较复杂，提取效率易受到基质的影响，因此需选择提取效率高且对基质提取较少的溶剂作为提取溶剂，常见的提取溶剂主要有乙腈和甲醇等。甲醇与乙腈相比更安全无害，且更具润湿性，使基质分散更均匀，对大部分化合物的提取效果更好。甲醇中添加 1% 甲酸，可提高部分化合物（如大黄素及芦荟大黄素）回收率。超声波辅助提取广泛地用于化妆品的样品前处理，水剂、膏霜类、乳液类、凝胶类和粉剂类等绝大多数化妆品样品均可用该法进行样品前处理。综上所述，确定如下前处理过程：称取样品 0.5 g（精确到 0.0001 g），置于 10 mL 具塞比色管中，加入 1% 甲酸甲醇溶液约 9 mL，涡旋振荡，使试样与提取溶剂充分混匀。超声提取 10 min，静置至室温，用 1% 甲酸甲醇溶液定容至刻度，摇匀，以 10000 r/min 转速离心 10 min，取上清液经 0.22 μm 有机滤膜过滤，滤液作为供试品溶液备用（供试品溶液可根据实际浓度进行适当稀释）。

#### 4.3.2.4 质谱条件的优化

电喷雾离子源下，正负模式下分别对 1 mg/L 的 43 种待测物单标标准溶液作一级全扫描分析。实验表明，丹参酮 I、丹参酮 IIA、隐丹参酮、川芎嗪、蒿本内酯、氧化槐果碱、槐果碱、苦参碱以及氧化苦参碱在正离子模式响应高于负离子，获得准分子离子 [M+H]<sup>+</sup>；人参皂苷 Re、人参皂苷 Rd、人参皂苷 Rg1、甘草酸、甘草苷、甘草素、染料木素、大豆

苷元、葛根素、阿魏酸、大黄素、白藜芦醇、虎杖苷、积雪草苷、积雪草苷B、羟基积雪草苷、异绿原酸C、异绿原酸A、绿原酸、芦荟苷、芦荟大黄素、芦荟新苷D、菊苣酸、木犀草素、咖啡酸、槲皮素、山奈酚、芦丁、金丝桃苷、牡荆素葡萄糖苷、牡荆素鼠李糖苷、苯甲酰芍药苷、芍药内酯苷以及芍药苷在负离子模式响应高于正离子，人参皂苷Rg1、积雪草苷、积雪草苷B以及羟基积雪草苷获得加合离子[M+HCOO]<sup>-</sup>，其他化合物获得准分子离子[M-H]<sup>-</sup>。各待测物得到相应的母离子后,分别选用正/负离子模式作进一步优化。根据欧盟2006/657/EC决议中有关质谱分析方法必须不少于4个识别点的规定，在正/负离子模式下对碎裂电压和碰撞能量进行优化，优化后的质谱采集参数详见表3。最终根据色谱保留时间和两对MRM离子对的丰度比来定性鉴别各组分，以MRM定量离子对的峰面积为依据进行定量测定。由于负离子模式下同时测定的化合物较多，采用DMRM模式进行数据采集，可在确保准确定量的情况下仍有较高的灵敏度。

表 3 人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分监测离子对相关参数设定

序号	化合物	监测离子对	碎裂电压(V)	碰撞能量(V)	加合方式	扫描方式
1	人参皂苷 Re	945.5/783.6	230	36	[M-H]	ESI-
		945.5/637.5*	230	40		
2	人参皂苷 Rd	945.5/783.5*	230	40	[M-H]	ESI-
		945.5/161.1	230	48		
3	人参皂苷 Rg1	845.5/799.6*	80	24	[M+HCOO]	ESI-
		845.5/637.5	80	32		
4	丹参酮 I	277.1/249.1	140	20	[M+H]	ESI+
		277.1/178.1*	140	44		
5	丹参酮 IIA	295.1/277.1*	135	20	[M+H]	ESI+
		295.1/191.1	135	52		
6	隐丹参酮	297.2/251.1*	130	24	[M+H]	ESI+
		297.2/178.1	130	60		
7	甘草酸	821.4/351.1*	230	44	[M-H]	ESI-
		821.4/193.1	230	52		
8	甘草苷	417.1/255.1*	135	20	[M-H]	ESI-
		417.1/135	135	36		
9	甘草素	255.1/135	85	12	[M-H]	ESI-

序号	化合物	监测离子对	碎裂电压(V)	碰撞能量(V)	加合方式	扫描方式
		255.1/119.1*	85	28		
10	染料木素	269/133.0*	140	36	[M-H]	ESI-
		269/132.1	140	52		
11	大豆昔元	253.1/224.1*	125	28	[M-H]	ESI-
		253.1/208.1	125	36		
12	葛根素	415.1/295.1	135	24	[M-H]	ESI-
		415.1/267.1*	135	36		
13	川芎嗪	137.1/55.1	70	28	[M+H]	ESI+
		137.1/42.2*	70	28		
14	阿魏酸	193.1/134.0*	80	12	[M-H]	ESI-
		193.1/178	80	16		
15	蒿本内酯	191.1/77.0*	175	36	[M+H]	ESI+
		191.1/91	175	44		
16	大黄素	269/241.1	95	32	[M-H]	ESI-
		269/225.1*	95	28		
17	白藜芦醇	227.1/185.1*	95	20	[M-H]	ESI-
		227.1/143	95	28		
18	虎杖苷	389.1/227.1*	175	16	[M-H]	ESI-
		389.1/185	175	44		
19	积雪草苷	1003.5/957.4*	165	24	[M+HCOO]	ESI-
		1003.5/469.1	165	36		
20	积雪草苷 B	1019.5/973.4*	170	20	[M+HCOO]	ESI-
		1019.5/469.1	170	36		
21	羟基积雪草苷	1019.5/973.4*	170	20	[M+HCOO]	ESI-
		1019.5/469.1	170	36		
22	异绿原酸 C	515.1/353.1*	110	16	[M-H]	ESI-
		515.1/173	110	32		
23	异绿原酸 A	515.1/353.1*	130	12	[M-H]	ESI-
		515.1/191.1	130	36		
24	绿原酸	353.1/191.1*	95	16	[M-H]	ESI-
		353.1/85	95	52		

序号	化合物	监测离子对	碎裂电压(V)	碰撞能量(V)	加合方式	扫描方式
25	芦荟苷	417.1/297.1*	150	16	[M-H]	ESI-
		417.1/268.1	150	40		
26	芦荟大黄素	269/240.0*	135	15	[M-H]	ESI-
		269/183	135	25		
27	芦荟新苷 D	555.2/511.2	160	20	[M-H]	ESI-
		555.2/145.0*	160	32		
28	氧化槐果碱	263.2/245.3*	190	28	[M+H]	ESI+
		263.2/136.2	190	36		
29	槐果碱	247.2/136.1	135	36	[M+H]	ESI+
		247.2/96.1*	135	44		
30	苦参碱	249.2/148.1*	130	36	[M+H]	ESI+
		249.2/55.1	130	60		
31	氧化苦参碱	265.2/247.2	190	32	[M+H]	ESI+
		265.2/205.1*	190	32		
32	菊苣酸	473.1/311.1*	70	8	[M-H]	ESI-
		473.1/179	70	28		
33	木犀草素	285/151	140	28	[M-H]	ESI-
		285/133.0*	140	44		
34	咖啡酸	179/135.1*	85	16	[M-H]	ESI-
		179/89.1	85	40		
35	槲皮素	301/179	120	20	[M-H]	ESI-
		301/151.0*	120	24		
36	山奈酚	285/211.1	115	32	[M-H]	ESI-
		285/185.0*	115	28		
37	芦丁	609.1/301	210	36	[M-H]	ESI-
		609.1/300.0*	210	40		
38	金丝桃苷	463.1/301.1	165	28	[M-H]	ESI-
		463.1/300.1*	165	28		
39	牡荆素葡萄糖苷	593.1/413.1	215	24	[M-H]	ESI-
		593.1/293.1*	215	40		
40	牡荆素鼠李糖苷	577.1/413.1	205	24	[M-H]	ESI-

序号	化合物	监测离子对	碎裂电压(V)	碰撞能量(V)	加合方式	扫描方式
		577.1/293.1*	205	40		
41	苯甲酰芍药苷	583.2/553.2*	185	4	[M-H]	ESI-
		583.2/121.1	185	20		
42	芍药内酯苷	479.1/121.0*	175	16	[M-H]	ESI-
		479.1/77.1	175	60		
43	芍药苷	479.1/449.2	175	4	[M-H]	ESI-
		479.1/121.0*	175	20		

\*为推荐的定量离子。

#### 4.3.2.5 色谱条件的优化

因43种植物提取物标识组分质谱条件涉及到正负离子，为保证各化合物响应，按化合物的电离模式分为2个不同色谱条件方法。本研究涉及的43种植物提取物标识组分中有7组同分异构体（人参皂苷Re和人参皂苷Rd；大黄素、芦荟大黄素和染料木素；甘草苷和芦荟苷；异绿原酸A和异绿原酸C；积雪草苷B和羟基积雪草苷；芍药内酯苷和芍药苷；木犀草素和山奈酚），给色谱分离条件的建立带来了较大挑战。根据前期经验，选用高柱效、窄内径、中等长度的色谱柱可对43种植物提取物标识组分有效分离。此外考察了甲醇-0.2%甲酸水溶液、乙腈-0.2%甲酸水溶液两种流动相在相同梯度洗脱条件下，对物质分离的影响。结果表明，乙腈-0.2%甲酸水溶液作为流动相，能够较好地分离各物质成分，且峰形和分辨率较好。经反复试验，选用Agilent RRHD Eclipse Plus Zorbax C<sub>18</sub>(3.0×100 mm, 1.8 μm) 色谱柱作为分离色谱柱进行分析，以0.2%甲酸溶液为水相，乙腈为有机相，优化梯度洗脱，43种植物提取物标识组分（包括7组同分异构体）皆可以获得较佳分离效果、保留时间分布均匀，且待测物色谱峰拖尾明显减少，质谱灵敏度良好。梯度洗脱详见表4及表5。

表 4 梯度洗脱程序（正离子模式）

时间 (min)	流动相 A (%)	流动相 B (%)
0.00	95.0	5.0
1.00	95.0	5.0
2.00	85.0	15.0
4.00	50.0	50.0
12.00	5.0	95.0

时间 (min)	流动相 A (%)	流动相 B (%)
13.50	5.0	95.0
13.51	90.0	5.0
15.50	90.0	5.0

表 5 梯度洗脱程序 (负离子模式)

时间 (min)	流动相 A (%)	流动相 B (%)
0.00	85.0	15.0
1.00	85.0	15.0
12.00	75.0	25.0
18.00	50.0	50.0
23.00	5.0	95.0
25.00	5.0	95.0
25.01	85.0	15.0
27.00	85.0	15.0

人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分标准溶液的多反应监测色谱图见图 2.1~图 2.43。

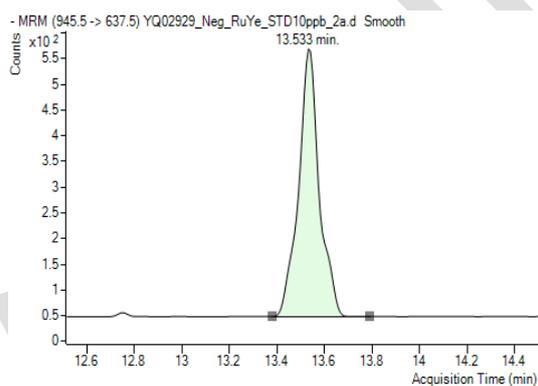


图2.1 人参皂苷Re

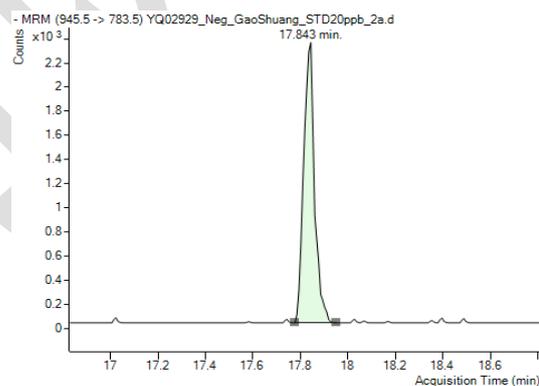


图2.2 人参皂苷Rd

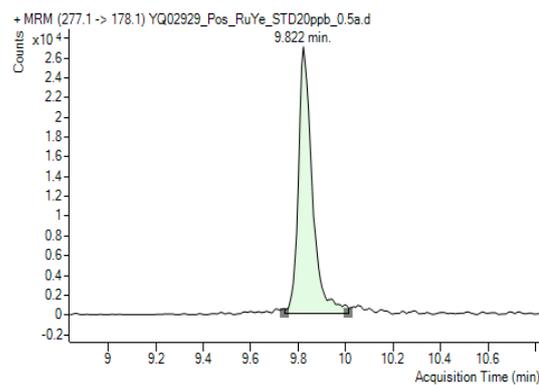
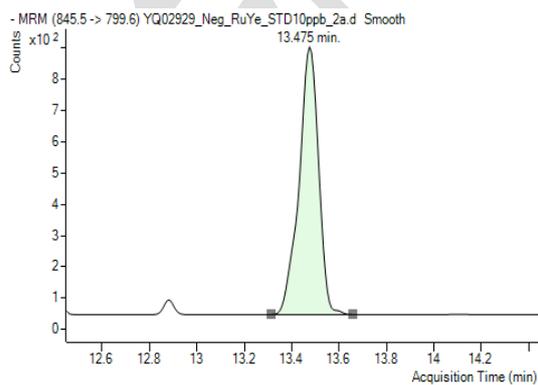


图2.3 人参皂苷Rg1

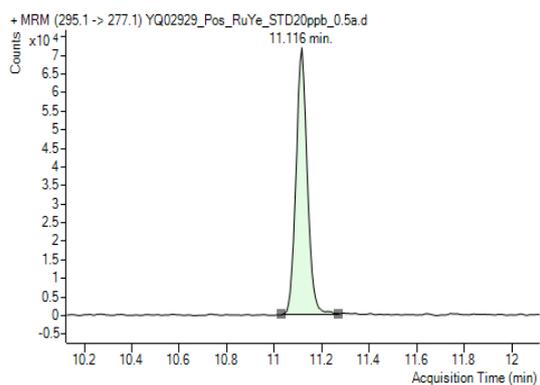


图2.4 丹参酮I

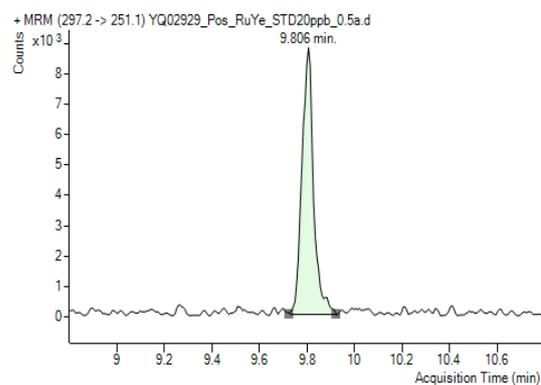


图2.5 丹参酮IIA

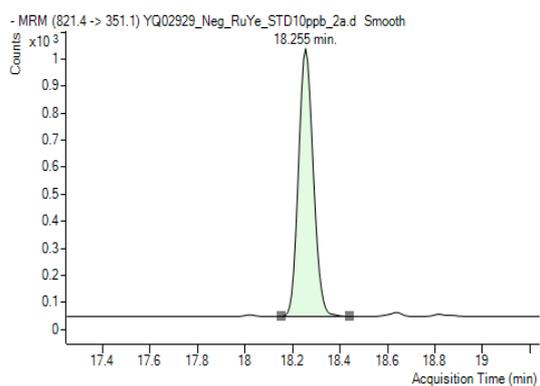


图2.6 隐丹参酮

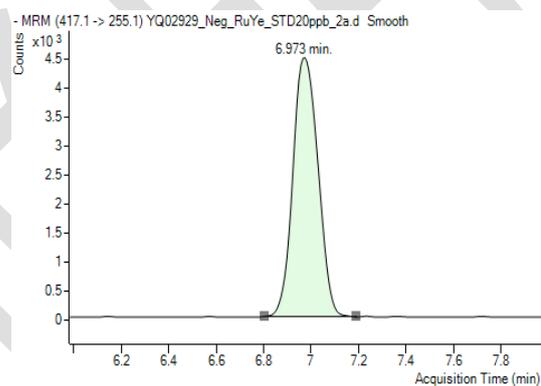


图2.7 甘草酸

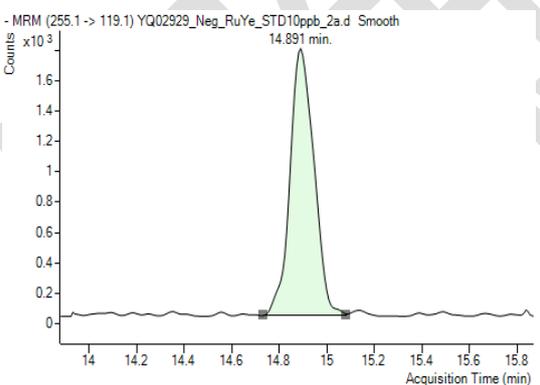


图2.8 甘草苷

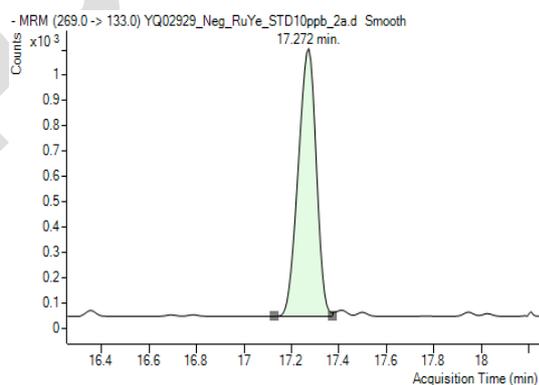


图2.9 甘草素

图2.10 染料木素

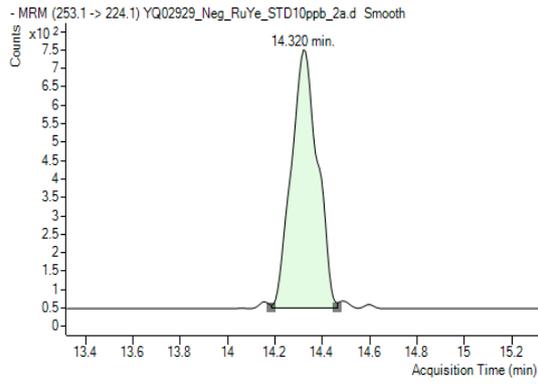


图2.11 大豆苷元

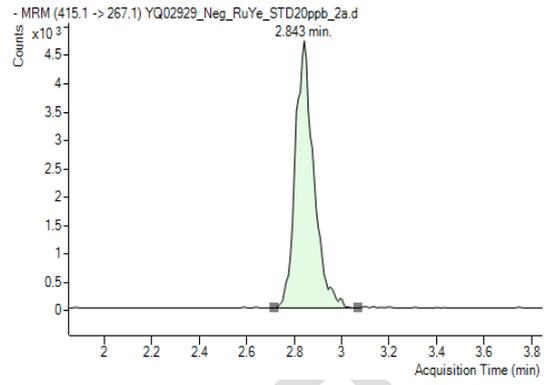


图2.12 葛根素

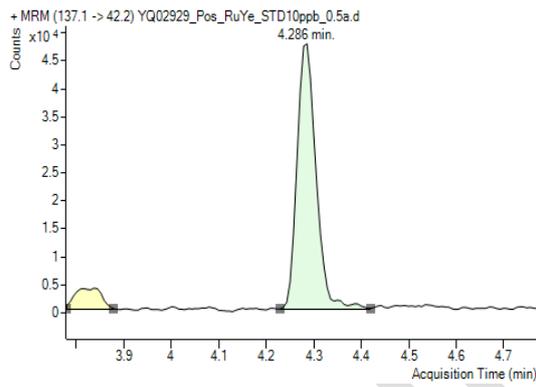


图2.13 川芎嗪

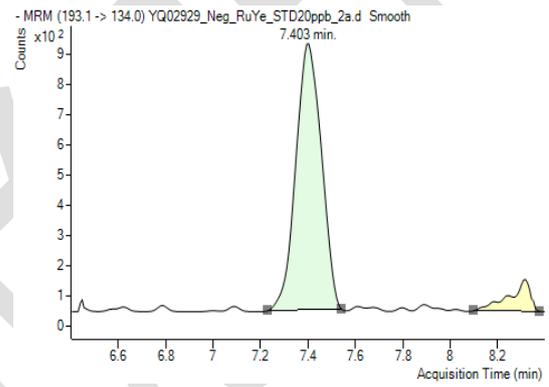


图2.14 阿魏酸

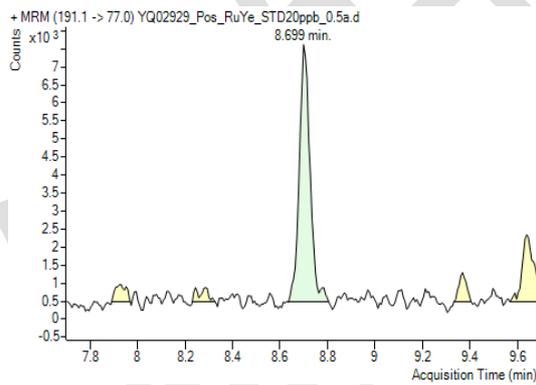


图2.15 蒿本内酯

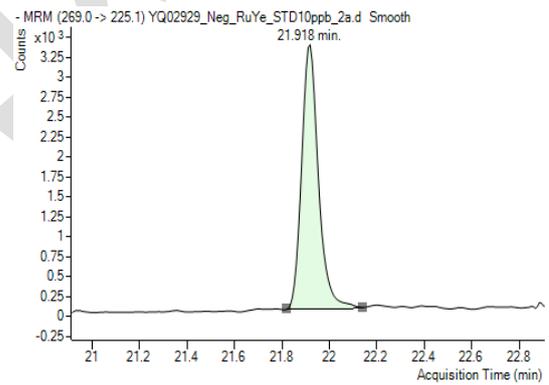


图2.16 大黄素

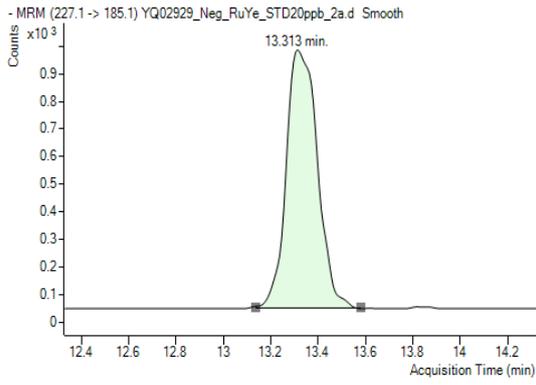


图2.17 白藜芦醇

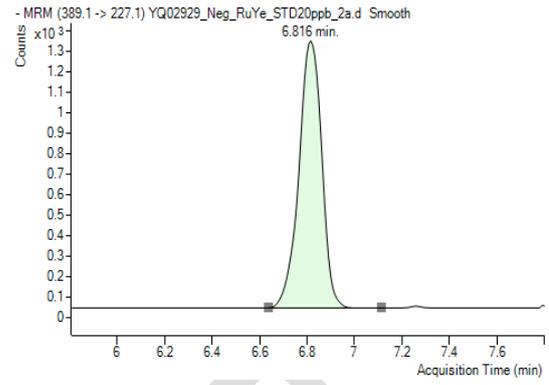


图2.18 虎杖苷

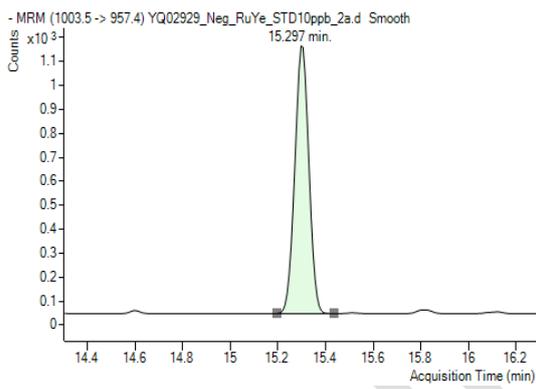


图2.19 积雪草苷

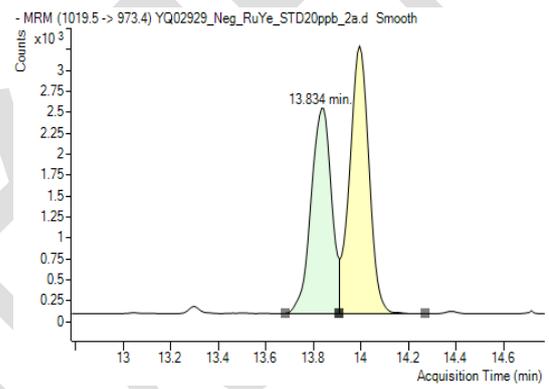


图2.20 积雪草苷B

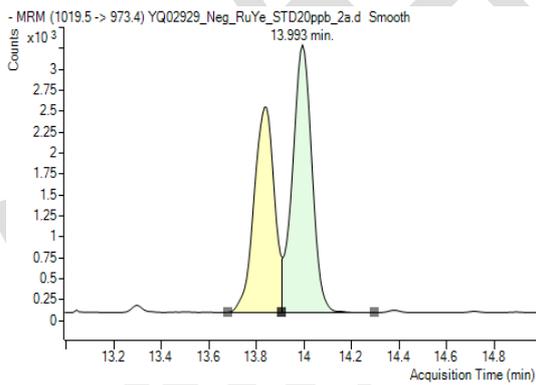


图2.21 羟基积雪草苷

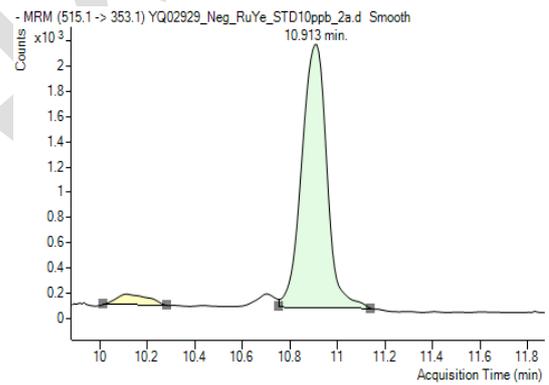


图2.22 异绿原酸C

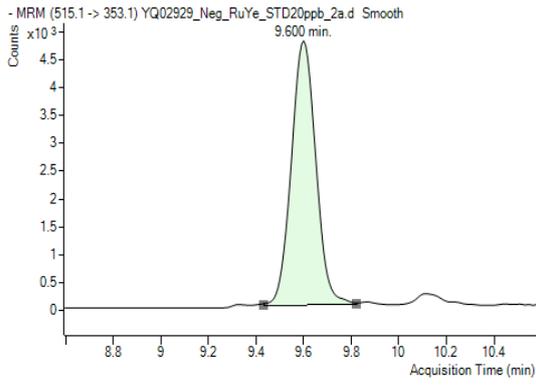


图2.23 异绿原酸A

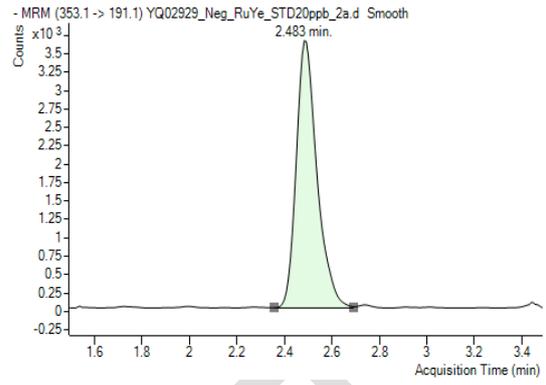


图2.24 绿原酸

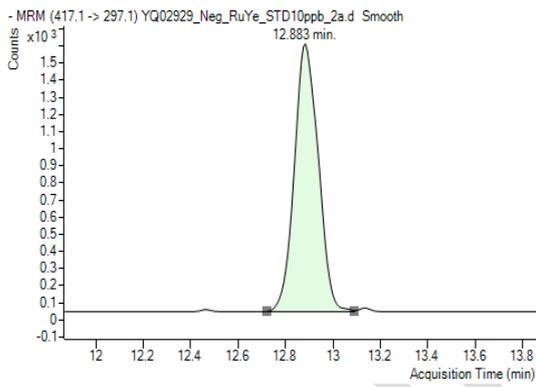


图2.25 芦荟苷

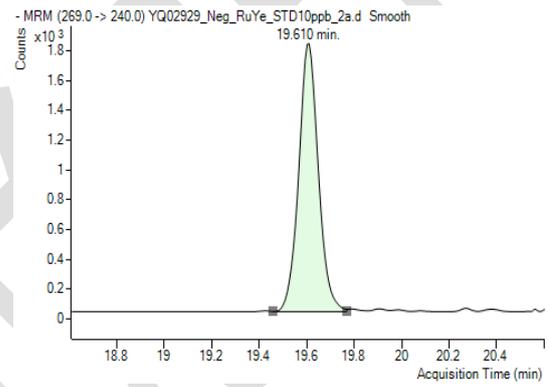


图2.26 芦荟大黄素

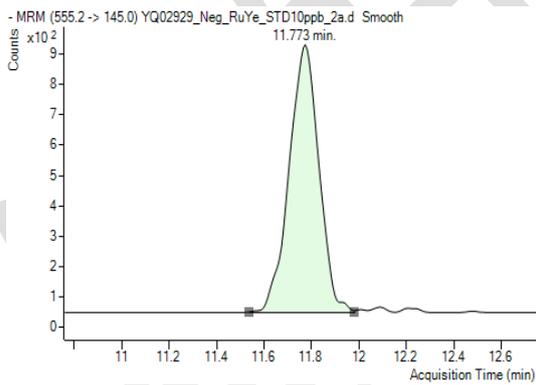


图2.27 芦荟新苷D

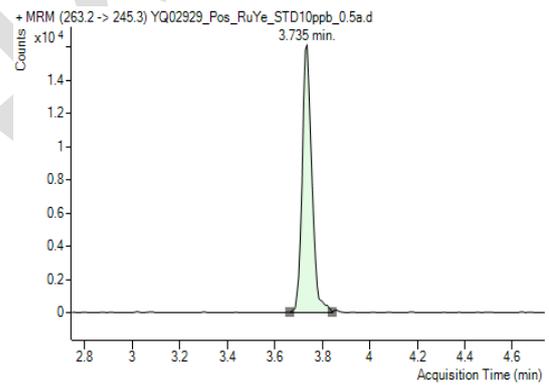


图2.28 氧化槐果碱

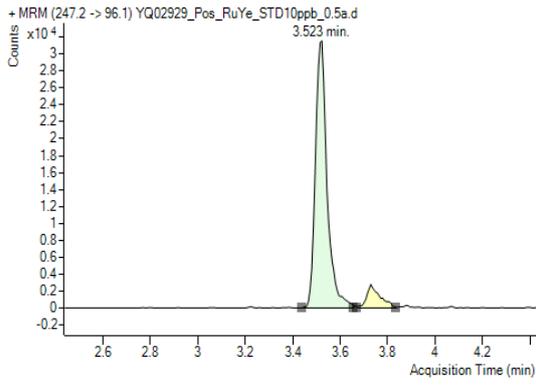


图2.29 槐果碱

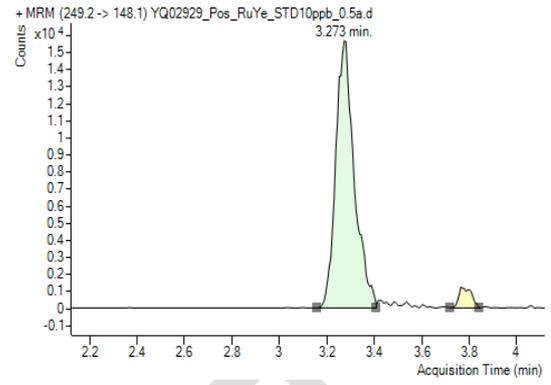


图2.30 苦参碱

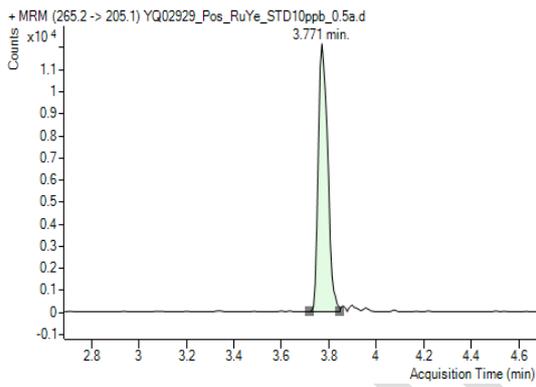


图2.31 氧化苦参碱

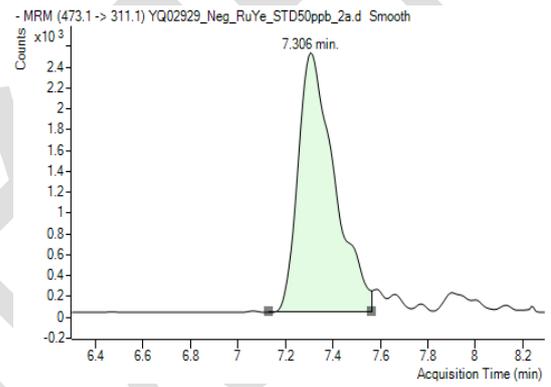


图2.32 菊苣酸

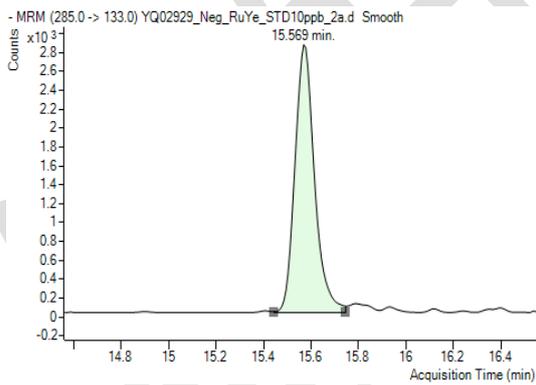


图2.33 木犀草素

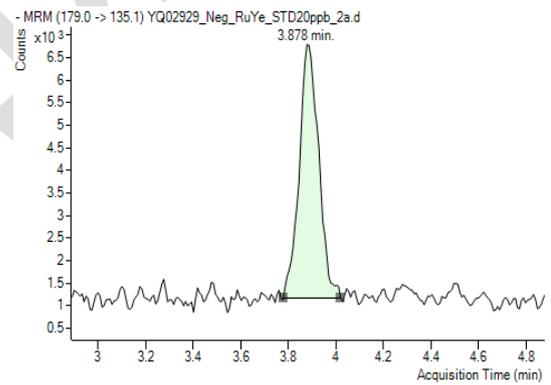


图2.34 咖啡酸

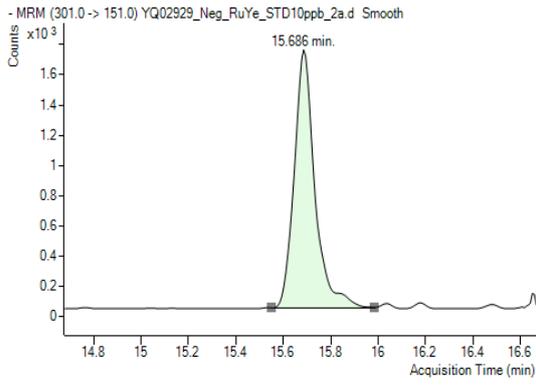


图2.35 槲皮素

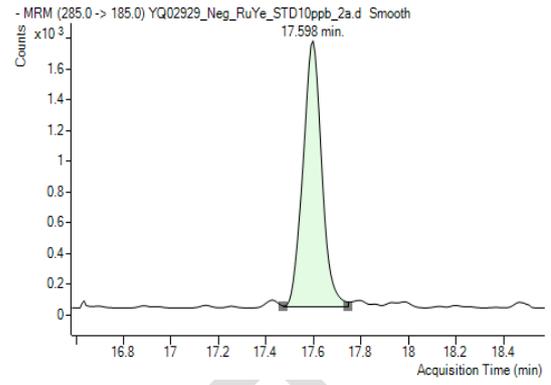


图2.36 山奈酚

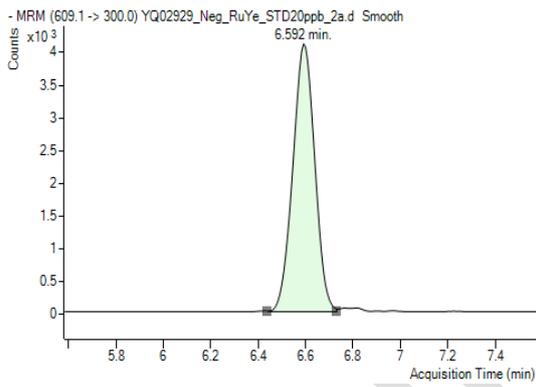


图2.37 芦丁

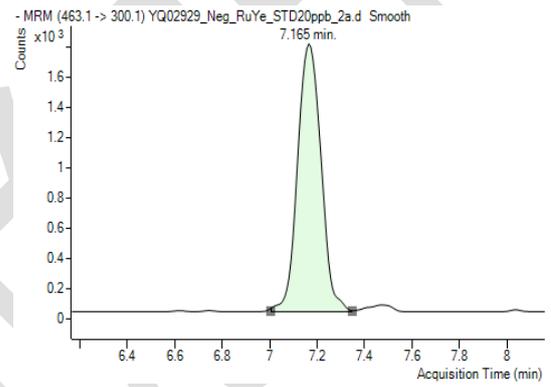


图2.38 金丝桃苷

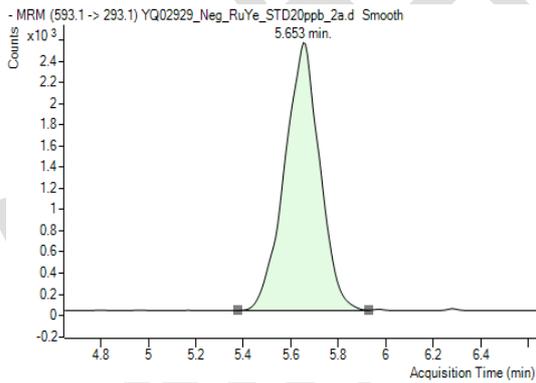


图2.39 牡荆素葡萄糖苷

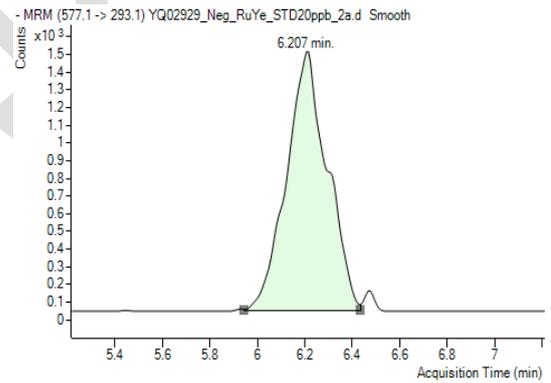


图2.40 牡荆素鼠李糖苷

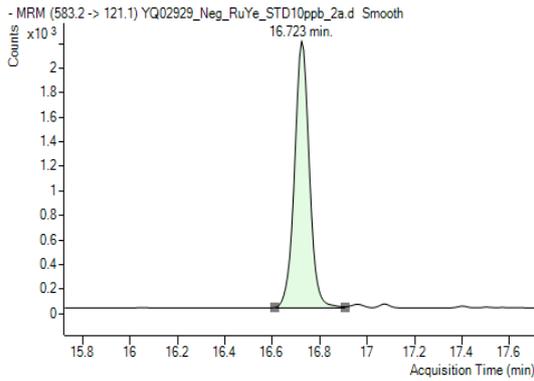


图2.41 苯甲酰芍药苷

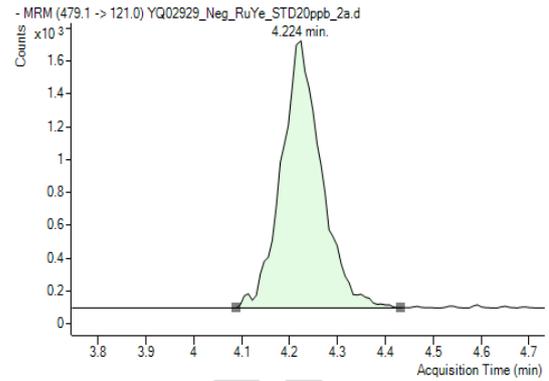


图2.42 芍药内酯苷

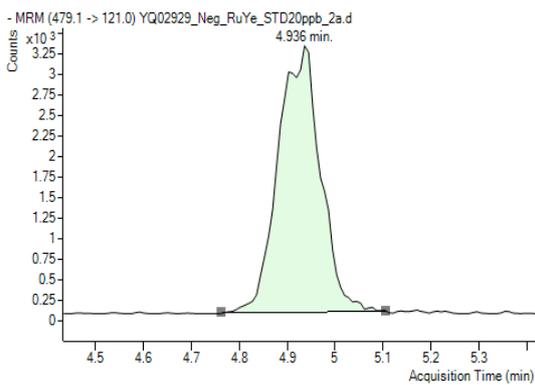


图2.43 芍药苷

#### 4.3.2.6 植物提取物鉴别

分析结果时需对照化妆品产品标签，如果检出了某提取物当中的一种或以上标识组分（标签中注明的成分除外，例如：标签中同时标有甘草提取物和甘草酸，则应将甘草酸成分除外），判断该化妆品中含有该提取物；若该提取物的所有标识性成分均未检出，则判断该化妆品不含该提取物。

#### 4.3.2.7 植物提取物含量

植物提取物含量报出形式以“\*\*提取物（以\*\*计）”表示。

### 4.4 解决的主要问题

本方法通过优化目标化合物的液相色谱条件和质谱参数，以及对不同类型样品的前处理方法进行摸索，最终建立了一套标准性的检测方法，解决的主要问题包括：

- （1）确定了前处理方法，包括提取溶剂、提取方式的选择；
- （2）确定了液相色谱仪和质谱仪的检测参数，包括色谱柱、流动相、质谱参数等；
- （3）完成了方法学的考察，包括专属性、检测限、定量限、线性与范围、准确度、精密度等。

(4) 完成了方法的适用性试验，对市售膏霜类、乳液类、液体类、凝胶类、粉剂类化妆品样品进行了检测。

#### 4.5 修订标准时应列出与原标准的主要差异和水平对比

该标准属首次起草，无与原标准的主要差异和水平对比。

### 五、主要试验（或验证）情况分析、综述结论

#### 5.1 基本情况

为确保本方法通则的统一性、协调性、适用性、一致性、规范性和可操作性，标准起草工作小组组织 4 个实验室，包括广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）（机构 A）、广州海关技术中心（机构 B）；广州质量监督检测研究院（机构 C）；广州汇标检测技术中心（机构 D），对本标准方法进行了验证。

各实验室的测试工作均由经验丰富的应用工程师完成。从测试过程和测试结果看，本方法通则具有统一性、协调性、适用性、规范性和可操作性。

#### 5.2 机构 A 试验分析

本方法验证结果由广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）验证。选择基质较为复杂的乳液和膏霜两种化妆品作为代表性基质，对所建立方法进行了验证。验证项目为检测限、定量限、线性与范围、准确度、精密度等。

##### 5.2.1 专属性

取溶剂空白（1%甲酸甲醇溶液）、2种基质类别空白样品（膏霜及乳液）及对应空白基质配制的对照品溶液分别进质谱仪分析，溶剂、各基质空白样品和空白基质对照品溶液的总离子流图见图3.1~图3.10，实验结果表明空白溶液、空白样品（膏霜及乳液）溶液不干扰待测物的测定。

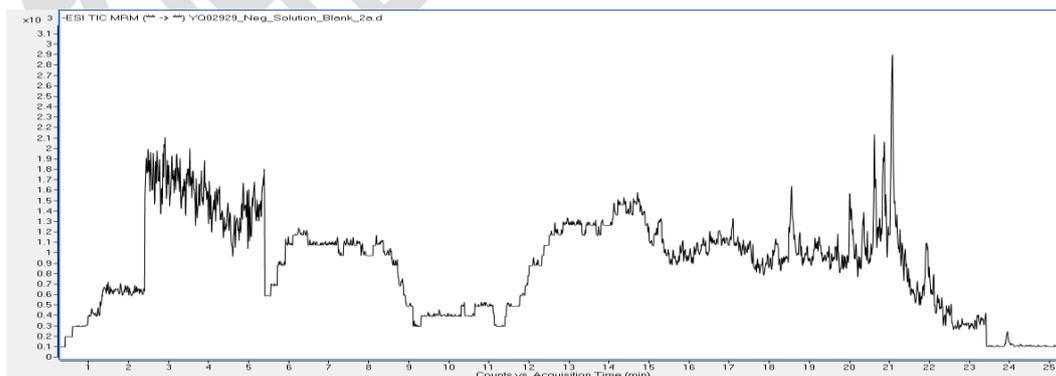


图3.1 空白溶剂总离子流图（负离子）

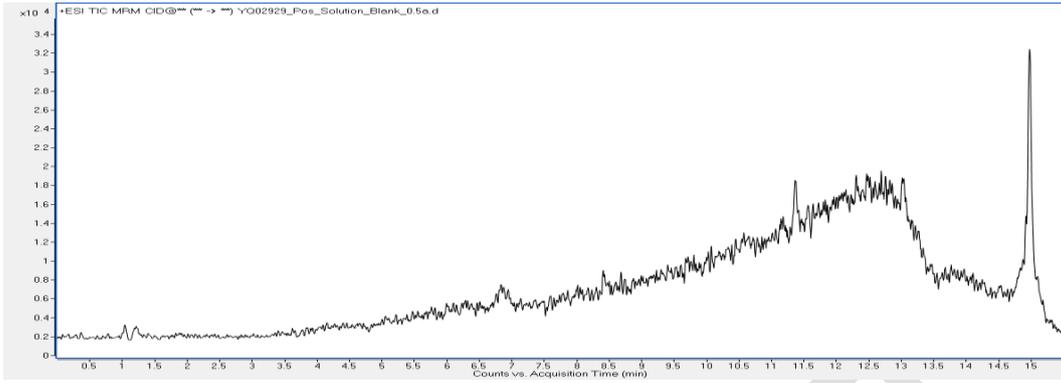


图3.2 空白溶剂总离子流图（正离子）

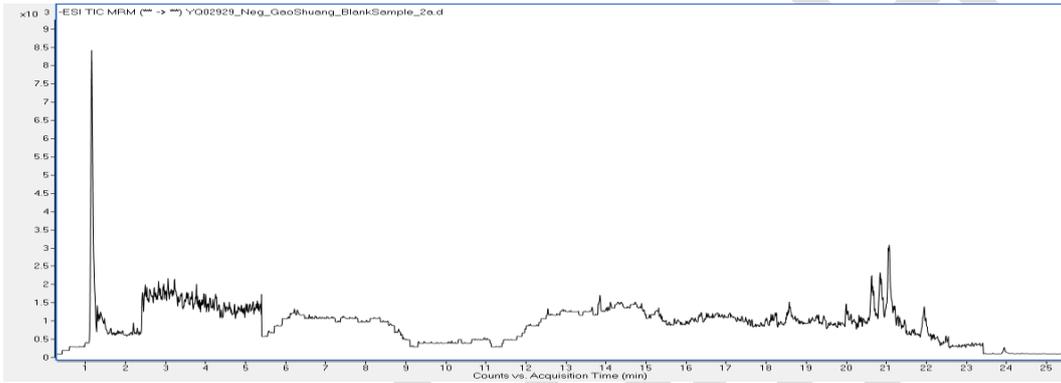


图3.3 空白膏霜样品溶液总离子流图（负离子）

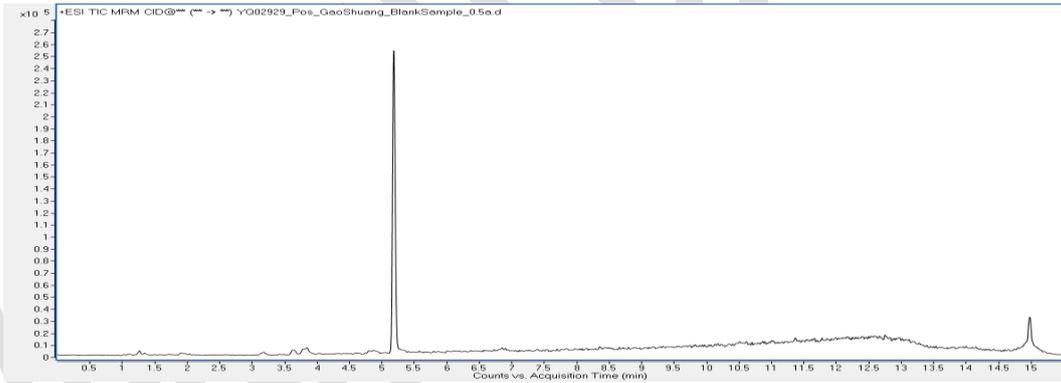


图3.4 空白膏霜样品溶液总离子流图（正离子）

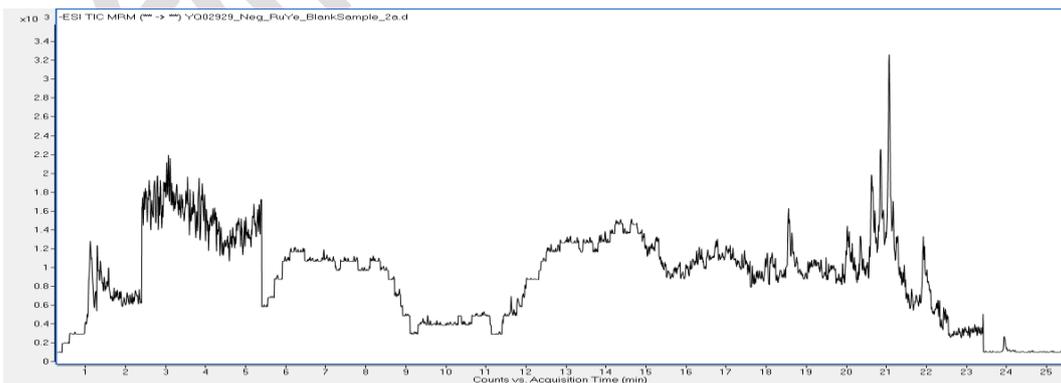


图3.5 空白乳液样品溶液总离子流图（负离子）

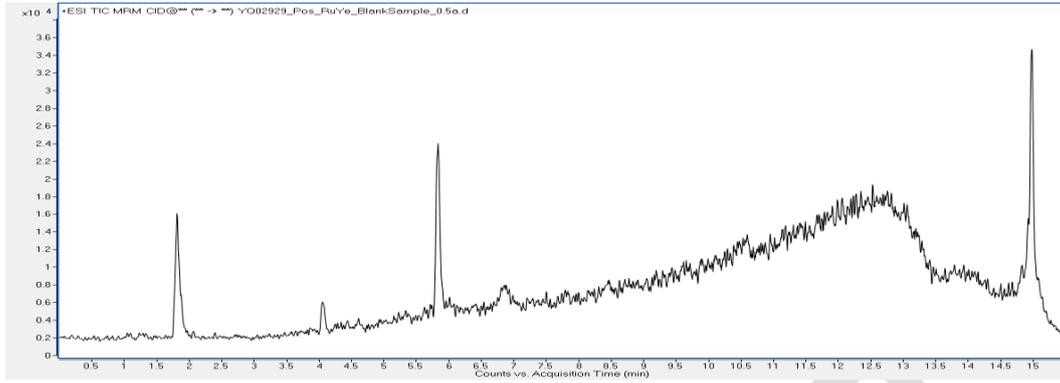


图3.6 空白乳液样品溶液总离子流图（正离子）

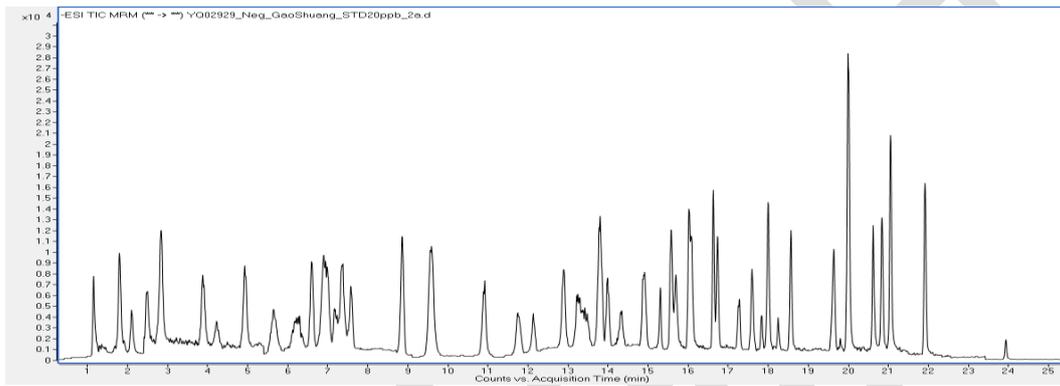


图3.7 空白膏霜基质对照品溶液总离子流图（负离子）

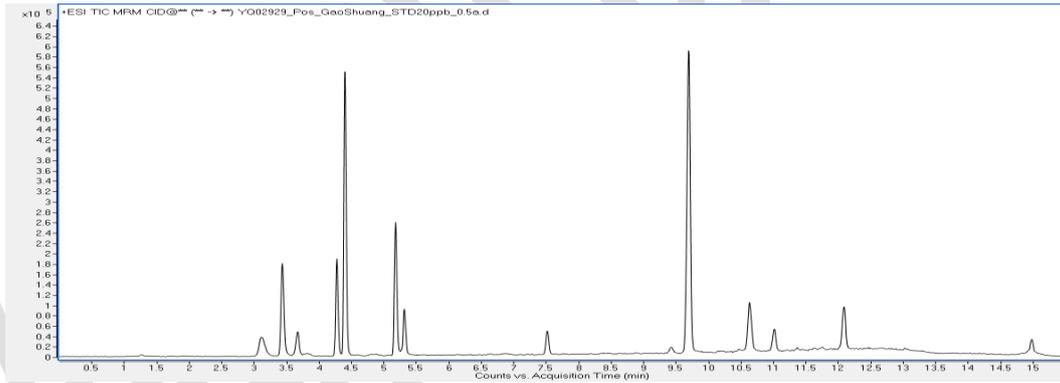


图3.8 空白膏霜基质对照品溶液总离子流图（正离子）

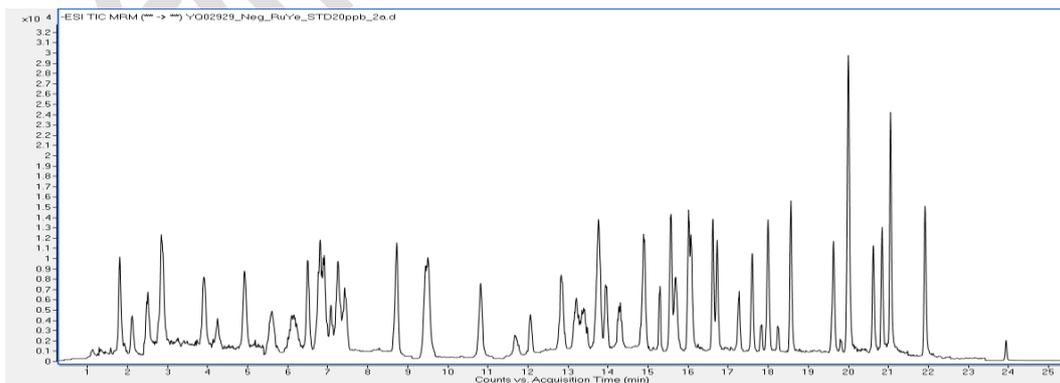


图3.9 空白乳液基质对照品溶液总离子流图（负离子）

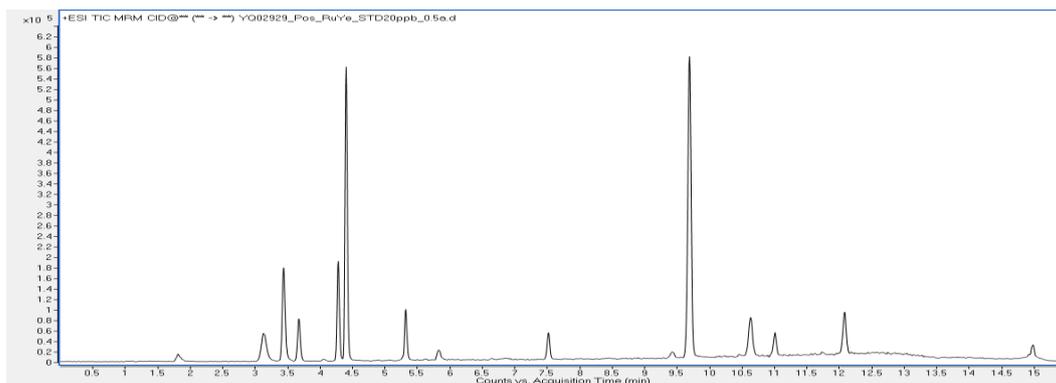


图 3.10 空白乳液基质对照品溶液总离子流图（正离子）

### 5.2.2 基质效应

与其他分析手段不同，质谱分析尤其是电喷雾质谱分析往往会存在基质效应，影响方法的灵敏度、精密度和准确度。减少基质效应的方法通常包括稀释样品溶液、增加净化步骤、采用同位素内标物、配制基质匹配标准溶液以及优化色谱-质谱条件等。采用同位素内标物存在内标价格高昂且获取不易的问题，难以全面匹配所有待测化合物。相比之下，配制基质匹配标准溶液能校正基质的抑制或增强作用，有效地消除基质效应，无需繁琐净化步骤与昂贵的内标，适用于快速分析，目前已被广泛应用于各领域。综合考虑，本法采用空白基质配制基质匹配标准溶液进行含量测定，以改善基质效应的影响，保证定量结果的准确性。

### 5.2.3 检测限及定量限

本标准方法中人参皂苷Re等43种植物提取物标识组分的检测限、定量下限及取样量为0.5 g时的检出浓度和最低定量浓度见表6。结果表明，人参皂苷Re等43种植物提取物标识组分的检测限为0.13~83  $\mu\text{g/L}$ ；定量下限为0.40~250  $\mu\text{g/L}$ ；检出浓度为0.0026~1.7  $\text{mg/kg}$ ；最低定量浓度为0.008~5.0  $\text{mg/kg}$ 。

表 6 人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分的检出限、定量下限、检出浓度和最低定量浓度

序号	组分名称	检出限 ( $\mu\text{g/L}$ )	定量下限 ( $\mu\text{g/L}$ )	检出浓度 ( $\text{mg/kg}$ )	最低定量浓度 ( $\text{mg/kg}$ )
1	人参皂苷 Re	17	50	0.33	1.0
2	人参皂苷 Rd	17	50	0.33	1.0
3	人参皂苷 Rg1	3.3	10	0.067	0.20
4	丹参酮 I	0.67	2.0	0.013	0.040

序号	组分名称	检出限 ( $\mu\text{g/L}$ )	定量下限 ( $\mu\text{g/L}$ )	检出浓度 ( $\text{mg/kg}$ )	最低定量浓度 ( $\text{mg/kg}$ )
5	丹参酮 IIA	0.13	0.40	0.0026	0.0080
6	隐丹参酮	0.13	0.40	0.0026	0.0080
7	甘草酸	3.3	10	0.067	0.20
8	甘草苷	3.3	10	0.067	0.20
9	甘草素	3.3	10	0.067	0.20
10	染料木素	3.3	10	0.067	0.20
11	大豆苷元	3.3	10	0.067	0.20
12	葛根素	3.3	10	0.067	0.20
13	川芎嗪	0.67	2.0	0.013	0.040
14	阿魏酸	3.3	10	0.067	0.20
15	蒿本内酯	83	250	1.7	5.0
16	大黄素	0.33	1.0	0.0067	0.020
17	白藜芦醇	17	50	0.33	1.0
18	虎杖苷	3.3	10	0.067	0.20
19	积雪草苷	3.3	10	0.067	0.20
20	积雪草苷 B	6.7	20	0.13	0.40
21	羟基积雪草苷	6.7	20	0.13	0.40
22	异绿原酸 C	3.3	10	0.067	0.20
23	异绿原酸 A	3.3	10	0.067	0.20
24	绿原酸	3.3	10	0.067	0.20
25	芦荟苷	3.3	10	0.067	0.20
26	芦荟大黄素	17	50	0.33	1.0
27	芦荟新苷 D	3.3	10	0.067	0.20
28	氧化槐果碱	0.67	2.0	0.013	0.040
29	槐果碱	0.67	2.0	0.013	0.040
30	苦参碱	0.33	1.0	0.0067	0.020

序号	组分名称	检出限 ( $\mu\text{g/L}$ )	定量下限 ( $\mu\text{g/L}$ )	检出浓度 ( $\text{mg/kg}$ )	最低定量浓度 ( $\text{mg/kg}$ )
31	氧化苦参碱	0.67	2.0	0.013	0.040
32	菊苣酸	3.3	10	0.067	0.20
33	木犀草素	3.3	10	0.067	0.20
34	咖啡酸	3.3	10	0.067	0.20
35	槲皮素	1.7	5.0	0.033	0.10
36	山奈酚	17	50	0.33	1.0
37	芦丁	3.3	10	0.067	0.20
38	金丝桃苷	1.7	5.0	0.033	0.10
39	牡荆素葡萄糖苷	3.3	10	0.067	0.20
40	牡荆素鼠李糖苷	3.3	10	0.067	0.20
41	苯甲酰芍药苷	17	50	0.33	1.0
42	芍药内酯苷	17	50	0.33	1.0
43	芍药苷	17	50	0.33	1.0

#### 5.2.4 线性及线性范围

在优化的色谱-质谱条件下，对制备好的系列混合标准溶液进行测定，以各组分的MRM定量离子对峰面积为纵坐标（y），对应的质量浓度为横坐标（x,  $\mu\text{g/L}$ ）绘制标准曲线，得到线性回归方程和线性相关系数（ $R^2$ ），详见表7~表8。结果表明，人参皂苷Re等43种植物提取物标识组分在各自质量浓度范围内线性关系良好，相关系数 $R^2$ 均大于0.99。

表7 人参皂苷Re等43种植物提取物标识组分在膏霜类基质中的线性及线性范围

序号	化合物	线性范围 ( $\mu\text{g/L}$ )	回归方程	相关系数 $R^2$
1	人参皂苷 Re	50-2500	$y=70.66x-816.64$	0.9976
2	人参皂苷 Rd	50-2500	$y=90.59x-1059.91$	0.9985
3	人参皂苷 Rg1	10-500	$y=432.27x-1544.80$	0.9963
4	丹参酮 I	2-100	$y=7630.26x-3336.50$	0.9997
5	丹参酮 IIA	0.4-20	$y=55506.91x-6380.67$	0.9970

序号	化合物	线性范围 (μg/L)	回归方程	相关系数R <sup>2</sup>
6	隐丹参酮	0.4-20	y=21492.03x-2105.04	0.9997
7	甘草酸	10-500	y=400.95x-835.49	0.9988
8	甘草苷	10-500	y=2467.38x-10034.40	0.9967
9	甘草素	10-500	y=1835.00x-7939.08	0.9964
10	染料木素	10-500	y=764.01x-2537.31	0.9998
11	大豆苷元	10-500	y=683.12x-2560.64	0.9990
12	葛根素	10-500	y=1925.67x-7364.99	0.9960
13	川芎嗪	2-100	y=13016.34x-9330.03	0.9978
14	阿魏酸	10-500	y=479.19x-380.65	0.9975
15	蒿本内酯	250-5000	y=24.95x-446.75	0.9989
16	大黄素	1-50	y=26087.44x-4709.12	0.9989
17	白藜芦醇	50-2500	y=161.65x-1260.33	0.9967
18	虎杖苷	10-500	y=666.33x-1924.32	0.9916
19	积雪草苷	10-400	y=336.19x-1092.30	0.9977
20	积雪草苷 B	20-1000	y=555.05x-3557.85	0.9972
21	羟基积雪草苷	20-1000	y=643.06x-5588.07	0.9979
22	异绿原酸 C	10-500	y=1859.41x-6910.40	0.9980
23	异绿原酸 A	10-500	y=2737.46x-11501.22	0.9964
24	绿原酸	10-500	y=1467.66x-2779.60	0.9939
25	芦荟苷	10-500	y=1953.22x-7781.25	0.9957
26	芦荟大黄素	50-2500	y=224.62x-4137.12	0.9977
27	芦荟新苷 D	10-500	y=913.99x-3421.71	0.9966
28	氧化槐果碱	2-100	y=2202.25x-1599.13	0.9918
29	槐果碱	2-100	y=14968.09x-9339.52	0.9972
30	苦参碱	1-50	y=7463.89x-2380.16	0.9985
31	氧化苦参碱	2-100	y=2097.59x-813.61	0.9903

序号	化合物	线性范围 (μg/L)	回归方程	相关系数R <sup>2</sup>
32	菊苣酸	10-500	y=742.87x-2755.10	0.9985
33	木犀草素	10-500	y=2836.65x-9810.63	0.9988
34	咖啡酸	10-500	y=2150.99x-4387.52	0.9927
35	槲皮素	5-200	y=1452.60x-3755.38	0.9948
36	山奈酚	50-2500	y=213.79x-1106.75	0.9985
37	芦丁	10-500	y=1980.04x-7234.17	0.9967
38	金丝桃苷	5-250	y=1928.39x-3935.05	0.9980
39	牡荆素葡萄糖苷	10-500	y=1280.54x-2417.79	0.9956
40	牡荆素鼠李糖苷	10-500	y=1376.59x-4686.22	0.9976
41	苯甲酰芍药苷	50-2500	y=264.71x-4257.75	0.9987
42	芍药内酯苷	50-2500	y=117.32x-1306.90	0.9995
43	芍药苷	50-2500	y=235.52x-1458.91	0.9958

表8 人参皂苷Re等43种植物提取物标识组分在乳液类基质中的线性及线性范围

序号	化合物	线性范围 (μg/L)	回归方程	相关系数R <sup>2</sup>
1	人参皂苷 Re	50-2500	y=75.09x-1781.88	0.9971
2	人参皂苷 Rd	50-2500	y=136.93x-1617.60	0.9980
3	人参皂苷 Rgl	10-500	y=433.43x-1999.70	0.9970
4	丹参酮 I	2-100	y=6028.06x-303.64	0.9979
5	丹参酮 IIA	0.4-20	y=51842.25x-4556.38	0.9964
6	隐丹参酮	0.4-20	y=19089.32x-4029.50	0.9961
7	甘草酸	10-500	y=415.65 x-486.95	0.9975
8	甘草苷	10-500	y=2645.39x-10433.52	0.9980
9	甘草素	10-500	y=2358.80x-9122.34	0.9989
10	染料木素	10-500	y=784.30x-1979.06	0.9990
11	大豆苷元	10-500	y=857.00x-1500.26	0.9988

序号	化合物	线性范围 (μg/L)	回归方程	相关系数R <sup>2</sup>
12	葛根素	10-500	y=2033.07x-8427.32	0.9979
13	川芎嗪	2-100	y=12888.68x-3428.97	0.9913
14	阿魏酸	10-500	y=486.96x-967.74	0.9975
15	蒿本内酯	250-5000	y=25.63x-805.01	0.9986
16	大黄素	1-50	y=24026.66x-4773.15	0.9915
17	白藜芦醇	50-2500	y=158.69x-2212.50	0.9989
18	虎杖苷	10-500	y=698.98x-1465.03	0.9940
19	积雪草苷	10-400	y=351.00x-1175.88	0.9959
20	积雪草苷 B	20-1000	y=547.74x-3718.64	0.9990
21	羟基积雪草苷	20-1000	y=628.54x-3213.50	0.9970
22	异绿原酸 C	10-500	y=1844.27x-4524.31	0.9975
23	异绿原酸 A	10-500	y=2807.35x-9511.40	0.9975
24	绿原酸	10-500	y=1527.96x-3681.48	0.9932
25	芦荟苷	10-500	y=1994.19x-7529.96	0.9987
26	芦荟大黄素	50-2500	y=219.78x-3437.27	0.9963
27	芦荟新苷 D	10-500	y=488.81x-664.31	0.9974
28	氧化槐果碱	2-100	y=4002.20x-3373.66	0.9971
29	槐果碱	2-100	y=15031.72x-7504.45	0.9980
30	苦参碱	1-50	y=10103.21x-3237.66	0.9980
31	氧化苦参碱	2-100	y=3883.13x-2645.07	0.9970
32	菊苣酸	10-500	y=783.82x-2579.51	0.9981
33	木犀草素	10-500	y=2893.36x-7196.04	0.9987
34	咖啡酸	10-500	y=2296.29x-4214.65	0.9949
35	槲皮素	5-200	y=1621.25x-4343.33	0.9953
36	山奈酚	50-2500	y=222.27x-389.35	0.9987
37	芦丁	10-500	y=2058.59x-9915.14	0.9976

序号	化合物	线性范围 (μg/L)	回归方程	相关系数R <sup>2</sup>
38	金丝桃苷	5-250	y=2064.72x-3089.37	0.9968
39	牡荆素葡萄糖苷	10-500	y=1302.33x-1797.94	0.9945
40	牡荆素鼠李糖苷	10-500	y=1536.39x-4538.05	0.9983
41	苯甲酰芍药苷	50-2500	y=261.53x-4910.25	0.9983
42	芍药内酯苷	50-2500	y=115.80x-910.31	0.9994
43	芍药苷	50-2500	y=251.82x-3423.74	0.9983

### 5.2.5 回收率和精密度

分别称取2种基质样品0.5 g (精确到0.0001 g) 置于10 mL具塞比色管中, 按“4.3.2.3”优化好的前处理方法进行处理, 每种基质的高中低浓度分别平行制备六份, 将测得峰面积代入标准曲线计算被测物质的浓度, 再计算被测物质的回收率。回收率结果见表9。实测膏霜基质中人参皂苷Re等43种特征标识组分的回收率为85.6%~117.1%, RSD为1.0%~12.2%; 乳液基质中人参皂苷Re等43种特征标识组分的回收率为87.6%~116.0%, RSD为0.9%~12.3%。综上, 线性范围浓度加标回收率为75%~130%, 相对标准偏差小于15%。

表9 人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分的回收率和精密度 (n=6)

序号	化合物	加标量 (mg/kg)	膏霜类		乳液类	
			回收率 /%	RSD /%	回收率 /%	RSD /%
1	人参皂苷 Re	2.0	112.7	7.5	114.1	9.2
		10.0	101.1	2.5	99.3	3.9
		20.0	97.8	4.8	94.8	5.6
2	人参皂苷 Rd	2.0	102.3	6.4	110.3	6.2
		10.0	98.5	5.1	101.0	4.0
		20.0	98.4	3.2	96.0	6.1
3	人参皂苷 Rg1	0.40	94.2	10.7	109.8	9.7
		2.0	99.3	6.4	102.9	5.1
		4.0	97.6	3.6	93.1	2.9
4	丹参酮 I	0.080	100.1	8.2	101.2	4.7
		0.40	92.6	4.2	87.6	5.1
		1.0	86.6	5.0	94.3	4.1

序号	化合物	加标量 (mg/kg)	膏霜类		乳液类	
			回收率 /%	RSD /%	回收率 /%	RSD /%
5	丹参酮 IIA	0.020	102.8	4.2	103.3	5.2
		0.080	92.5	2.9	91.1	4.9
		0.20	94.2	2.3	100.5	2.9
6	隐丹参酮	0.020	100.1	7.7	104.2	12.0
		0.080	96.3	6.5	94.7	5.0
		0.20	98.5	5.0	104.8	3.7
7	甘草酸	0.40	99.7	3.5	93.6	8.6
		2.0	104.4	4.3	102.9	7.7
		4.0	94.8	2.4	98.7	5.8
8	甘草苷	0.40	104.2	3.7	105.9	5.1
		2.0	94.3	2.7	97.5	2.0
		4.0	98.6	1.9	96.7	2.5
9	甘草素	0.40	97.3	5.4	90.6	5.7
		2.0	101.2	2.1	94.2	1.9
		4.0	94.3	1.6	95.2	1.5
10	染料木素	0.40	89.6	8.2	100.3	6.7
		2.0	96.0	3.7	99.7	4.0
		4.0	99.6	1.5	96.2	2.1
11	大豆苷元	0.40	93.0	6.9	104.1	5.7
		2.0	101.1	4.0	96.5	5.6
		4.0	97.4	2.5	95.0	2.9
12	葛根素	0.40	103.8	2.4	106.0	4.1
		2.0	95.9	1.8	96.3	2.0
		4.0	97.6	1.9	95.0	0.9
13	川芎嗪	0.10	105.5	2.2	102.9	4.5
		0.40	91.2	2.5	101.4	2.9
		1.0	102.2	1.5	97.3	1.3
14	阿魏酸	0.40	96.6	7.7	95.6	3.7
		2.0	98.5	2.4	95.8	4.3
		4.0	93.4	2.3	94.5	1.1
15	蒿本内酯	5.0	110.1	9.8	115.9	5.5
		20.0	99.4	4.7	97.8	4.0

序号	化合物	加标量 (mg/kg)	膏霜类		乳液类	
			回收率 /%	RSD /%	回收率 /%	RSD /%
		50.0	96.3	4.6	99.4	2.5
16	大黄素	0.040	85.6	7.5	98.4	6.9
		0.20	100.4	12.2	102.5	12.3
		0.40	91.1	9.6	95.2	9.1
17	白藜芦醇	2.0	93.8	7.8	96.6	6.8
		10.0	95.5	6.5	97.1	2.7
		20.0	90.9	3.3	98.3	4.1
18	虎杖苷	0.40	117.1	7.6	108.6	7.8
		2.0	104.7	2.7	95.8	3.4
		4.0	92.2	2.1	96.0	2.3
19	积雪草苷	0.80	107.4	8.8	101.4	6.7
		4.0	94.8	5.1	93.1	2.6
		8.0	96.0	2.2	93.1	4.4
20	积雪草苷 B	0.80	93.3	4.7	93.6	8.6
		4.0	99.2	3.7	105.0	6.7
		8.0	94.8	2.9	101.9	8.4
21	羟基积雪草苷	0.80	100.9	4.4	100.8	8.6
		4.0	96.5	4.9	94.8	3.6
		8.0	95.1	2.8	98.0	3.3
22	异绿原酸 C	0.40	103.8	3.2	103.6	5.1
		2.0	98.2	4.6	99.8	4.9
		4.0	100.3	4.0	99.0	2.2
23	异绿原酸 A	0.40	104.4	3.9	104.6	2.9
		2.0	98.7	2.1	97.8	2.2
		4.0	96.9	1.9	96.9	2.5
24	绿原酸	0.40	108.2	5.7	107.2	2.0
		2.0	103.7	1.6	99.7	2.4
		4.0	97.3	1.2	98.7	2.1
25	芦荟苷	0.40	114.6	4.9	95.1	3.9
		2.0	94.0	1.8	94.2	3.0
		4.0	93.4	1.4	95.7	1.4
26	芦荟大黄素	2.0	93.5	5.4	91.7	7.5

序号	化合物	加标量 (mg/kg)	膏霜类		乳液类	
			回收率 /%	RSD /%	回收率 /%	RSD /%
		10.0	95.0	5.2	93.5	4.3
		20.0	93.9	2.3	93.7	4.1
		0.40	95.3	5.6	101.5	4.6
27	芦荟新苷 D	2.0	99.8	3.4	96.9	4.8
		4.0	96.0	1.5	100.4	3.2
		0.10	102.0	2.6	108.0	7.0
28	氧化槐果碱	0.40	99.4	6.0	102.7	3.4
		1.0	103.5	5.0	107.2	4.6
		0.10	97.0	3.8	101.7	3.2
29	槐果碱	0.40	94.2	2.2	95.3	1.6
		1.0	94.5	1.4	96.1	0.9
		0.10	99.3	1.4	102.5	7.2
30	苦参碱	0.40	92.3	3.6	98.3	3.2
		1.0	98.4	2.8	98.2	1.4
		0.10	99.3	9.1	109.6	9.2
31	氧化苦参碱	0.40	91.9	3.9	89.3	5.3
		1.0	95.1	4.6	96.9	2.3
		0.40	101.1	7.6	92.2	7.0
32	菊苣酸	2.0	95.2	6.8	96.3	10.0
		4.0	93.9	5.8	93.9	5.1
		0.40	92.0	7.8	95.8	10.8
33	木犀草素	2.0	94.9	9.3	90.3	9.2
		4.0	85.7	7.1	90.7	4.7
		0.40	101.9	3.9	103.3	2.5
34	咖啡酸	2.0	97.5	2.3	94.4	2.7
		4.0	98.0	1.7	95.6	1.6
		0.40	94.7	7.9	105.5	9.3
35	槲皮素	2.0	94.8	10.7	95.2	6.1
		4.0	89.3	8.5	92.9	6.2
		2.0	94.3	8.9	107.3	7.8
36	山奈酚	10.0	99.1	7.4	93.5	8.8
		20.0	86.5	8.6	97.0	5.1

序号	化合物	加标量 (mg/kg)	膏霜类		乳液类	
			回收率 /%	RSD /%	回收率 /%	RSD /%
37	芦丁	0.40	103.8	5.7	110.6	2.6
		2.0	99.0	2.3	93.7	2.5
		4.0	91.5	1.2	96.3	1.6
38	金丝桃苷	0.20	103.4	4.7	95.9	5.3
		1.0	100.3	5.4	94.0	4.3
		2.0	94.9	2.5	95.3	3.1
39	牡荆素葡萄糖苷	0.40	102.2	4.9	103.6	3.7
		2.0	100.1	2.0	95.0	2.4
		4.0	96.4	1.8	94.3	1.8
40	牡荆素鼠李糖苷	0.40	103.6	7.7	106.5	6.1
		2.0	104.3	1.8	95.3	2.4
		4.0	96.9	2.0	92.8	3.3
41	苯甲酰芍药苷	2.0	106.7	3.9	116.0	6.3
		10.0	97.0	3.6	101.3	2.0
		20.0	95.6	2.6	96.0	3.1
42	芍药内酯苷	2.0	100.5	5.4	101.5	5.0
		10.0	99.8	1.6	102.6	2.9
		20.0	93.2	1.4	98.7	2.1
43	芍药苷	2.0	105.4	4.6	109.9	4.0
		10.0	98.2	1.7	96.7	2.5
		20.0	97.5	1.0	98.8	1.4

### 5.2.6 实际样品测定

采用本文所建方法对市场购买或客户送检的 53 批次标签均有标示含有单一或多种植物提取物的化妆品进行分析，53 批次样品结果显示均未检出人参、当归、虎杖、蒲公英以及山楂叶等植物提取物标识成分，另外检出包括丹参、甘草、葛根、积雪草、金银花、芦荟、苦参、桑叶以及芍药等植物提取物标识成分的化妆品样品检测结果如表 10 所示，检出的标识成分含量在 0.060 ~ 5756 mg/kg 之间。从结果分析可见，其中检出植物提取物中标识组分多为 1 种组分，如标签标示甘草植物提取物的样品 12 批，检出甘草植物提取物标识组分的样品有 9 批，而其中甘草酸 9 批次、甘草苷 1 批次、甘草素 2 批次。鉴于化妆品中植物提取物添加量一般都比较低，分析结果时需对照化妆品产品标签，如果检

出了某提取物当中的一种或以上标识性成分，可初步判断该化妆品中含有该提取物；若该提取物的所有标识性成分均未检出，则可初步判断该化妆品不含该提取物，或者需进一步进行分析该提取物原料质量问题。

化妆品标签标示添加了植物提取物，但实际上并没有检出该提取物标识成分的情况常有发生。本研究建立的测定方法对规范化妆品生产经营活动，保证化妆品质量安全、加强化妆品监督管理都具有一定的意义。

**表 10 典型样品测定结果**

序号	植物提取物	标签标识批次	检出批次	标识成分检出批次
1	丹参提取物	8	6	丹参酮 I(5); 丹参酮 IIA(6); 隐丹参酮 (4)
2	甘草提取物	12	9	甘草酸 (9); 甘草苷 (1); 甘草素 (2)
3	葛根提取物	2	1	染料木素 (1); 大豆苷元 (0); 葛根素 (0)
4	积雪草提取物	12	7	积雪草苷 (7); 积雪草苷 B(7); 羟基积雪草苷 (7)
5	金银花提取物	6	2	异绿原酸 C(2); 异绿原酸 A(2); 绿原酸 (2)
6	芦荟提取物	16	1	芦荟苷 (1); 芦荟大黄素 (0); 芦荟新苷 D(0)
7	苦参提取物	5	4	氧化槐果碱 (2); 槐果碱 (2); 苦参碱 (4); 氧化苦参碱 (2)
8	桑叶提取物	4	3	槲皮素 (0); 山奈酚 (0); 芦丁 (3)
9	芍药提取物	5	3	苯甲酰芍药苷 (3); 芍药内酯苷 (3); 芍药苷 (3)

### 5.3 机构 B 试验分析

本方法验证结果由广州海关技术中心验证。选择基质较为复杂的乳液和膏霜两种化妆品作为代表性基质，对所建立方法进行了验证。验证项目为检测限、定量限、线性与范围、准确度、精密度等。

#### 5.3.1 检测限及定量限

本标准方法中人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分的检测限、定量下限及取样量为 0.5 g 时的检出浓度和最低定量浓度见表 11。结果表明，人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分的检测限为 0.13~83  $\mu\text{g/L}$ ; 定量下限为 0.40~250  $\mu\text{g/L}$ ; 检出浓度为 0.0026~1.7 mg/kg; 最低定量浓度为 0.008~5.0 mg/kg。

表 11 人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分的检出限、定量下限、检出浓度和最低定量浓度

序号	组分名称	检出限 ( $\mu\text{g/L}$ )	定量下限 ( $\mu\text{g/L}$ )	检出浓度 ( $\text{mg/kg}$ )	最低定量浓度 ( $\text{mg/kg}$ )
1	人参皂苷 Re	17	50	0.33	1.0
2	人参皂苷 Rd	17	50	0.33	1.0
3	人参皂苷 Rg1	3.3	10	0.067	0.20
4	丹参酮 I	0.67	2.0	0.013	0.040
5	丹参酮 IIA	0.13	0.40	0.0026	0.0080
6	隐丹参酮	0.13	0.40	0.0026	0.0080
7	甘草酸	3.3	10	0.067	0.20
8	甘草苷	3.3	10	0.067	0.20
9	甘草素	3.3	10	0.067	0.20
10	染料木素	3.3	10	0.067	0.20
11	大豆苷元	3.3	10	0.067	0.20
12	葛根素	3.3	10	0.067	0.20
13	川芎嗪	0.67	2.0	0.013	0.040
14	阿魏酸	3.3	10	0.067	0.20
15	蒿本内酯	83	250	1.7	5.0
16	大黄素	0.33	1.0	0.0067	0.020
17	白藜芦醇	17	50	0.33	1.0
18	虎杖苷	3.3	10	0.067	0.20
19	积雪草苷	3.3	10	0.067	0.20
20	积雪草苷 B	6.7	20	0.13	0.40
21	羟基积雪草苷	6.7	20	0.13	0.40
22	异绿原酸 C	3.3	10	0.067	0.20
23	异绿原酸 A	3.3	10	0.067	0.20
24	绿原酸	3.3	10	0.067	0.20

序号	组分名称	检出限 ( $\mu\text{g/L}$ )	定量下限 ( $\mu\text{g/L}$ )	检出浓度 ( $\text{mg/kg}$ )	最低定量浓度 ( $\text{mg/kg}$ )
25	芦荟苷	3.3	10	0.067	0.20
26	芦荟大黄素	17	50	0.33	1.0
27	芦荟新苷 D	3.3	10	0.067	0.20
28	氧化槐果碱	0.67	2.0	0.013	0.040
29	槐果碱	0.67	2.0	0.013	0.040
30	苦参碱	0.33	1.0	0.0067	0.020
31	氧化苦参碱	0.67	2.0	0.013	0.040
32	菊苣酸	3.3	10	0.067	0.20
33	木犀草素	3.3	10	0.067	0.20
34	咖啡酸	3.3	10	0.067	0.20
35	槲皮素	1.7	5.0	0.033	0.10
36	山奈酚	17	50	0.33	1.0
37	芦丁	3.3	10	0.067	0.20
38	金丝桃苷	1.7	5.0	0.033	0.10
39	牡荆素葡萄糖苷	3.3	10	0.067	0.20
40	牡荆素鼠李糖苷	3.3	10	0.067	0.20
41	苯甲酰芍药苷	17	50	0.33	1.0
42	芍药内酯苷	17	50	0.33	1.0
43	芍药苷	17	50	0.33	1.0

### 5.3.2 线性及线性范围

用空白基质提取液将人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分稀释成系列混合标准溶液，按所建方法中色谱-质谱条件进行测定，以人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分的浓度为横坐标，峰面积为纵坐标，进行曲线绘制分析，得到线性回归方程和线性相关系数 ( $R^2$ )，详见表 12~表 13。结果表明，人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分在各自质量浓度范围内线性关系良好，相关系数  $R^2$  均大于 0.99。

表12 人参皂苷Re等43种植物提取物标识组分在膏霜类基质中的线性及线性范围

序号	化合物	线性范围 (μg/L)	回归方程	相关系数R <sup>2</sup>
1	人参皂苷 Re	50-2500	$y=78.79x-1377.55$	0.9951
2	人参皂苷 Rd	50-2500	$y=157.31x-4260.58$	0.9948
3	人参皂苷 Rg1	10-500	$y=591.55x-2698.15$	0.9946
4	丹参酮 I	2-100	$y=12322.31x+5248.03$	0.9991
5	丹参酮 IIA	0.4-20	$y=85185.63x+2920.44$	0.9989
6	隐丹参酮	0.4-20	$y=40786.01x-1378.91$	0.9997
7	甘草酸	10-500	$y=379.26x-1341.62$	0.9964
8	甘草苷	10-500	$y=2587.75x-13462.57$	0.9937
9	甘草素	10-500	$y=1655.64x-11334.19$	0.9945
10	染料木素	10-500	$y=1063.71x-865.19$	0.9981
11	大豆苷元	10-500	$y=510.10x-2257.86$	0.9948
12	葛根素	10-500	$y=1898.28x-10089.87$	0.9915
13	川芎嗪	2-100	$y=15555.90x-12469.59$	0.9993
14	阿魏酸	10-500	$y=329.29x-567.37$	0.9956
15	蒿本内酯	250-5000	$y=28.35x+1775.75$	0.9993
16	大黄素	1-50	$y=32854.14x-3995.15$	0.9996
17	白藜芦醇	50-2500	$y=137.22x-2827.50$	0.9976
18	虎杖苷	10-500	$y=544.57x-1864.36$	0.9953
19	积雪草苷	10-400	$y=1142.00x-5009.31$	0.9961
20	积雪草苷 B	20-1000	$y=1117.64x-10458.24$	0.9927
21	羟基积雪草苷	20-1000	$y=1225.43x-13123.09$	0.9949
22	异绿原酸 C	10-500	$y=1261.14x-4718.53$	0.9945
23	异绿原酸 A	10-500	$y=1355.04x-7494.92$	0.9921
24	绿原酸	10-500	$y=1635.20x-6447.53$	0.9949

序号	化合物	线性范围 (μg/L)	回归方程	相关系数R <sup>2</sup>
25	芦荟苷	10-500	y=1757.93x-7821.91	0.9957
26	芦荟大黄素	50-2500	y=209.20x-4773.18	0.9950
27	芦荟新苷 D	10-500	y=991.55x-4318.66	0.9947
28	氧化槐果碱	2-100	y=5812.94x-5875.04	0.9972
29	槐果碱	2-100	y=25468.21x-18608.65	0.9997
30	苦参碱	1-50	y=10755.35x-5925.02	0.9967
31	氧化苦参碱	2-100	y=2705.20x-2086.48	0.9919
32	菊苣酸	10-500	y=710.46x-3415.21	0.9935
33	木犀草素	10-500	y=3323.57x-19287.08	0.9965
34	咖啡酸	10-500	y=2379.61x-6718.13	0.9958
35	槲皮素	5-200	y=1707.36x-3532.68	0.9988
36	山奈酚	50-2500	y=277.59x-433.88	0.9990
37	芦丁	10-500	y=1901.70x-10777.57	0.9927
38	金丝桃苷	5-250	y=1516.63x-4115.89	0.9926
39	牡荆素葡萄糖苷	10-500	y=1049.22x-4390.52	0.9942
40	牡荆素鼠李糖苷	10-500	y=1240.71x-5205.48	0.9953
41	苯甲酰芍药苷	50-2500	y=197.19x-5286.96	0.9941
42	芍药内酯苷	50-2500	y=32.78x-580.79	0.9958
43	芍药苷	50-2500	y=64.42x-840.92	0.9985

表13 人参皂苷Re等43种植物提取物标识组分在乳液类基质中的线性及线性范围

序号	化合物	线性范围 (μg/L)	回归方程	相关系数R <sup>2</sup>
1	人参皂苷 Re	50-2500	y=84.05x-1368.39	0.9989
2	人参皂苷 Rd	50-2500	y=167.61x-4452.43	0.9955
3	人参皂苷 Rg1	10-500	y=611.53x-1464.73	0.9929
4	丹参酮 I	2-100	y=10006.87x-6003.52	0.9983

序号	化合物	线性范围 (μg/L)	回归方程	相关系数R <sup>2</sup>
5	丹参酮 IIA	0.4-20	y=87426.68x-11945.96	0.9998
6	隐丹参酮	0.4-20	y=37882.00x-6732.10	0.9978
7	甘草酸	10-500	y=404.23x-1406.05	0.9966
8	甘草苷	10-500	y=2587.20x-12507.02	0.9954
9	甘草素	10-500	y=2632.62x-7028.34	0.9986
10	染料木素	10-500	y=1040.57x-1233.22	0.9971
11	大豆苷元	10-500	y=1022.26x-1663.03	0.9994
12	葛根素	10-500	y=1839.65x-8102.29	0.9964
13	川芎嗪	2-100	y=15473.05x-10494.74	0.9997
14	阿魏酸	10-500	y=333.91x-879.13	0.9974
15	蒿本内酯	250-5000	y=24.50x-657.79	0.9989
16	大黄素	1-50	y=27552.99x-3814.49	0.9984
17	白藜芦醇	50-2500	y=147.74x-2993.51	0.9952
18	虎杖苷	10-500	y=556.12x-1723.73	0.9954
19	积雪草苷	10-400	y=1289.18x-6467.85	0.9910
20	积雪草苷 B	20-1000	y=1158.89x-9495.68	0.9965
21	羟基积雪草苷	20-1000	y=1289.15x-11269.98	0.9961
22	异绿原酸 C	10-500	y=1227.48x-5565.87	0.9959
23	异绿原酸 A	10-500	y=1412.44x-6697.62	0.9954
24	绿原酸	10-500	y=1601.37x-5888.50	0.9980
25	芦荟苷	10-500	y=1600.60x-4575.14	0.9983
26	芦荟大黄素	50-2500	y=196.28x-5826.04	0.9914
27	芦荟新苷 D	10-500	y=586.42x-1611.09	0.9969
28	氧化槐果碱	2-100	y=5245.81x-6095.46	0.9944
29	槐果碱	2-100	y=25194.40x-17689.97	0.9998
30	苦参碱	1-50	y=13018.10x-5005.76	0.9978

序号	化合物	线性范围 (μg/L)	回归方程	相关系数R <sup>2</sup>
31	氧化苦参碱	2-100	y=5057.27x-5130.90	0.9961
32	菊苣酸	10-500	y=699.51x-2571.77	0.9956
33	木犀草素	10-500	y=3907.95x-11637.87	0.9985
34	咖啡酸	10-500	y=2307.43x-7609.76	0.9977
35	槲皮素	5-200	y=1899.56x-5076.95	0.9923
36	山奈酚	50-2500	y=268.70x-986.34	0.9973
37	芦丁	10-500	y=2013.81x-10068.79	0.9942
38	金丝桃苷	5-250	y=1544.24x-3686.72	0.9954
39	牡荆素葡萄糖苷	10-500	y=1093.77x-4015.93	0.9945
40	牡荆素鼠李糖苷	10-500	y=1394.08x-5265.32	0.9978
41	苯甲酰芍药苷	50-2500	y=210.47x-6124.53	0.9960
42	芍药内酯苷	50-2500	y=32.91x-357.20	0.9966
43	芍药苷	50-2500	y=70.10x-1234.76	0.9972

### 5.3.3 回收率和精密度

分别称取2种基质样品0.5 g (精确到0.0001 g) 置于10 mL具塞比色管中, 按所建立的前处理方法进行处理, 每种基质的高中低浓度分别平行制备六份, 将测得峰面积代入标准曲线计算被测物质的浓度, 再计算被测物质的回收率。回收率结果见表14。实测膏霜基质中人参皂苷Re等43种特征标识组分的回收率为82.4%~125.8%, RSD为1.1%~13.3%; 乳液基质中人参皂苷Re等43种特征标识组分的回收率为86.4%~122.3%, RSD为1.0%~8.1%。综上, 线性范围浓度加标回收率为75%~130%, 相对标准偏差小于15%。

表 14 人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分的回收率和精密度 (n=6)

序号	化合物	加标量 (mg/kg)	膏霜类		乳液类	
			回收率 /%	RSD /%	回收率 /%	RSD /%
1	人参皂苷 Re	2.0	101.8	2.7	89.7	4.4
		10.0	106.7	3.8	101.3	3.6
		20.0	93.3	5.3	92.5	4.6

序号	化合物	加标量 (mg/kg)	膏霜类		乳液类	
			回收率 /%	RSD /%	回收率 /%	RSD /%
2	人参皂苷 Rd	2.0	120.3	6.8	108.8	5.8
		10.0	102.3	2.7	105.3	2.4
		20.0	90.4	1.8	98.9	3.7
3	人参皂苷 Rg1	0.40	96.1	9.7	117.4	5.4
		2.0	91.0	5.2	103.0	5.9
		4.0	88.7	4.9	94.3	3.2
4	丹参酮 I	0.080	107.9	5.4	100.0	3.9
		0.40	86.3	2.5	96.4	4.1
		1.0	87.7	1.2	99.1	1.6
5	丹参酮 IIA	0.020	104.0	4.4	99.1	4.8
		0.080	90.4	3.7	93.2	2.9
		0.20	89.6	2.5	95.0	2.3
6	隐丹参酮	0.020	111.2	3.8	99.6	4.2
		0.080	91.8	4.6	97.7	3.8
		0.2	95.6	3.3	104.8	2.1
7	甘草酸	0.40	120.2	9.2	103.4	4.7
		2.0	98.1	4.4	98.0	5.8
		4.0	95.6	3.2	98.4	4.0
8	甘草苷	0.40	94.9	6.2	107.7	2.7
		2.0	96.9	3.2	93.3	2.8
		4.0	89.1	2.5	93.5	1.6
9	甘草素	0.40	101.4	3.5	112.4	6.1
		2.0	92.1	1.7	113.8	2.4
		4.0	87.7	2.8	92.5	2.0
10	染料木素	0.40	102.9	8.5	103.1	5.1
		2.0	97.1	3.2	96.4	3.9
		4.0	90.3	2.6	92.1	3.0
11	大豆苷元	0.40	99.8	3.4	109.8	3.7
		2.0	92.3	4.1	122.3	4.7
		4.0	87.9	2.4	90.8	1.2
12	葛根素	0.40	98.4	1.6	98.1	3.8
		2.0	95.4	2.1	102.5	2.2

序号	化合物	加标量 (mg/kg)	膏霜类		乳液类	
			回收率 /%	RSD /%	回收率 /%	RSD /%
		4.0	88.6	2.0	93.8	1.5
13	川芎嗪	0.10	105.7	1.5	105.7	2.5
		0.40	87.9	1.1	96.0	3.7
		1.0	91.9	2.3	97.5	2.4
14	阿魏酸	0.40	95.5	7.6	95.1	5.8
		2.0	102.2	3.2	99.2	4.0
		4.0	89.1	2.1	90.5	3.2
15	蒿本内酯	5.0	92.5	10.6	87.6	7.7
		20.0	107.5	3.1	91.4	6.6
		50.0	86.2	2.1	100.5	5.0
16	大黄素	0.040	90.8	13.3	101.3	3.7
		0.20	97.0	6.9	100.6	3.4
		0.40	84.1	9.9	98.8	1.4
17	白藜芦醇	2.0	99.0	10.6	90.4	2.4
		10.0	104.0	4.9	110.4	3.5
		20.0	83.1	2.7	94.0	1.8
18	虎杖苷	0.40	125.7	3.3	102.0	6.8
		2.0	100.1	4.2	102.9	3.4
		4.0	88.0	1.8	90.7	1.4
19	积雪草苷	0.80	111.7	3.9	105.8	3.3
		4.0	100.2	2.4	98.5	3.0
		8.0	90.8	2.9	96.2	2.0
20	积雪草苷 B	0.80	96.2	9.0	112.2	3.8
		4.0	96.9	3.7	104.5	3.7
		8.0	92.2	3.9	92.8	2.4
21	羟基积雪草苷	0.80	100.4	4.6	99.3	4.0
		4.0	97.5	2.8	104.6	1.7
		8.0	92.3	2.0	89.1	1.0
22	异绿原酸 C	0.40	101.6	7.1	106.2	1.8
		2.0	102.5	7.0	92.4	4.7
		4.0	90.7	4.6	97.4	3.2
23	异绿原酸 A	0.40	99.3	2.5	104.6	2.7

序号	化合物	加标量 (mg/kg)	膏霜类		乳液类	
			回收率 /%	RSD /%	回收率 /%	RSD /%
		2.0	98.2	3.3	102.3	2.5
		4.0	90.1	3.0	91.9	2.7
		0.40	110.0	2.2	104.5	1.7
24	绿原酸	2.0	104.6	1.8	102.8	1.9
		4.0	93.1	1.5	94.6	1.7
		0.40	102.2	5.3	105.1	2.2
25	芦荟苷	2.0	95.1	2.2	107.3	2.0
		4.0	91.7	2.1	95.3	1.9
		2.0	108.2	8.6	98.9	6.5
26	芦荟大黄素	10.0	99.3	4.2	96.4	2.4
		20.0	90.2	3.2	93.3	3.0
		0.40	115.8	5.2	101.4	3.4
27	芦荟新苷 D	2.0	98.3	3.1	116.7	5.5
		4.0	92.0	3.2	89.5	3.2
		0.10	92.3	7.3	97.0	5.0
28	氧化槐果碱	0.40	89.3	5.4	89.3	2.8
		1.0	88.6	2.4	94.8	4.3
		0.10	107.0	4.0	102.4	3.2
29	槐果碱	0.40	90.9	2.0	90.9	2.0
		1.0	91.8	1.2	97.2	2.1
		0.10	107.7	3.0	107.6	4.3
30	苦参碱	0.40	89.1	1.8	91.5	3.6
		1.0	88.8	2.6	96.5	1.6
		0.10	98.3	7.4	86.4	4.9
31	氧化苦参碱	0.40	96.6	5.3	90.3	1.6
		1.0	90.5	2.7	93.6	4.3
		0.40	88.4	9.5	99.1	5.5
32	菊苣酸	2.0	93.3	8.0	100.3	8.1
		4.0	83.2	7.8	97.5	2.2
		0.40	83.1	12.1	99.2	4.7
33	木犀草素	2.0	94.2	6.1	99.3	3.6
		4.0	85.5	7.5	92.6	2.0

序号	化合物	加标量 (mg/kg)	膏霜类		乳液类	
			回收率 /%	RSD /%	回收率 /%	RSD /%
34	咖啡酸	0.40	103.8	6.7	96.6	5.4
		2.0	99.2	2.0	98.2	3.0
		4.0	85.9	2.6	89.1	1.5
35	槲皮素	0.40	85.1	10.3	106.0	4.1
		2.0	92.6	8.1	99.2	3.6
		4.0	82.4	7.8	89.8	6.6
36	山奈酚	2.0	87.1	12.3	92.7	6.3
		10.0	92.3	4.5	97.6	3.4
		20.0	86.6	5.8	95.5	1.5
37	芦丁	0.40	103.6	6.4	113.8	3.3
		2.0	98.6	3.4	97.5	1.9
		4.0	89.7	2.1	94.7	1.9
38	金丝桃苷	0.20	105.5	6.1	98.6	5.6
		1.0	93.3	6.3	102.6	1.6
		2.0	88.8	6.0	92.1	2.6
39	牡荆素葡萄糖苷	0.40	125.8	6.1	108.7	5.9
		2.0	102.0	3.2	99.0	2.3
		4.0	89.1	3.7	93.3	1.9
40	牡荆素鼠李糖苷	0.40	94.8	6.1	102.8	5.3
		2.0	100.8	5.0	100.3	3.1
		4.0	90.3	2.5	92.4	2.7
41	苯甲酰芍药苷	2.0	108.7	6.7	102.9	5.1
		10.0	102.6	2.0	100.2	3.7
		20.0	94.4	5.1	95.3	2.2
42	芍药内酯苷	2.0	103.9	6.0	103.6	4.0
		10.0	104.7	4.5	97.7	2.1
		20.0	87.7	6.3	90.2	3.8
43	芍药苷	2.0	114.5	4.4	106.2	5.3
		10.0	109.3	4.1	96.4	2.5
		20.0	95.1	2.0	96.3	2.6

#### 5.4 机构 C 试验分析

本方法验证结果由广州质量监督检测研究院验证。选择基质较为复杂的乳液和膏霜

两种化妆品作为代表性基质，对所建立方法进行了验证。验证项目为检测限、定量限、线性与范围、准确度、精密度等。

#### 5.4.1 检测限及定量限

本标准方法中人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分的检测限、定量下限及取样量为 0.5 g 时的检出浓度和最低定量浓度见表 15。结果表明，人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分的检测限为 0.13~83  $\mu\text{g/L}$ ；定量下限为 0.40~250  $\mu\text{g/L}$ ；检出浓度为 0.0026~1.7  $\text{mg/kg}$ ；最低定量浓度为 0.008~5.0  $\text{mg/kg}$ 。

表 15 人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分的检出限、定量下限、检出浓度和最低定量浓度

序号	组分名称	检出限 ( $\mu\text{g/L}$ )	定量下限 ( $\mu\text{g/L}$ )	检出浓度 ( $\text{mg/kg}$ )	最低定量浓度 ( $\text{mg/kg}$ )
1	人参皂苷 Re	17	50	0.33	1.0
2	人参皂苷 Rd	17	50	0.33	1.0
3	人参皂苷 Rg1	3.3	10	0.067	0.20
4	丹参酮 I	0.67	2.0	0.013	0.040
5	丹参酮 IIA	0.13	0.40	0.0026	0.0080
6	隐丹参酮	0.13	0.40	0.0026	0.0080
7	甘草酸	3.3	10	0.067	0.20
8	甘草苷	3.3	10	0.067	0.20
9	甘草素	3.3	10	0.067	0.20
10	染料木素	3.3	10	0.067	0.20
11	大豆苷元	3.3	10	0.067	0.20
12	葛根素	3.3	10	0.067	0.20
13	川芎嗪	0.67	2.0	0.013	0.040
14	阿魏酸	3.3	10	0.067	0.20
15	蒿本内酯	83	250	1.7	5.0
16	大黄素	0.33	1.0	0.0067	0.020
17	白藜芦醇	17	50	0.33	1.0

序号	组分名称	检出限 ( $\mu\text{g/L}$ )	定量下限 ( $\mu\text{g/L}$ )	检出浓度 ( $\text{mg/kg}$ )	最低定量浓度 ( $\text{mg/kg}$ )
18	虎杖苷	3.3	10	0.067	0.20
19	积雪草苷	3.3	10	0.067	0.20
20	积雪草苷 B	6.7	20	0.13	0.40
21	羟基积雪草苷	6.7	20	0.13	0.40
22	异绿原酸 C	3.3	10	0.067	0.20
23	异绿原酸 A	3.3	10	0.067	0.20
24	绿原酸	3.3	10	0.067	0.20
25	芦荟苷	3.3	10	0.067	0.20
26	芦荟大黄素	17	50	0.33	1.0
27	芦荟新苷 D	3.3	10	0.067	0.20
28	氧化槐果碱	0.67	2.0	0.013	0.040
29	槐果碱	0.67	2.0	0.013	0.040
30	苦参碱	0.33	1.0	0.0067	0.020
31	氧化苦参碱	0.67	2.0	0.013	0.040
32	菊苣酸	3.3	10	0.067	0.20
33	木犀草素	3.3	10	0.067	0.20
34	咖啡酸	3.3	10	0.067	0.20
35	槲皮素	1.7	5.0	0.033	0.10
36	山奈酚	17	50	0.33	1.0
37	芦丁	3.3	10	0.067	0.20
38	金丝桃苷	1.7	5.0	0.033	0.10
39	牡荆素葡萄糖苷	3.3	10	0.067	0.20
40	牡荆素鼠李糖苷	3.3	10	0.067	0.20
41	苯甲酰芍药苷	17	50	0.33	1.0
42	芍药内酯苷	17	50	0.33	1.0
43	芍药苷	17	50	0.33	1.0

### 5.4.2 线性及线性范围

用空白基质提取液将人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分稀释成系列混合标准溶液，按所建方法中色谱-质谱条件进行测定，以人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分的浓度为横坐标，峰面积为纵坐标，进行曲线绘制分析，得到线性回归方程和线性相关系数 ( $R^2$ )，详见表 16~表 17。结果表明，人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分在各自质量浓度范围内线性关系良好，相关系数  $R^2$  均大于 0.99。

表16 人参皂苷Re等43种植物提取物标识组分在膏霜类基质中的线性及线性范围

序号	化合物	线性范围 ( $\mu\text{g/L}$ )	回归方程	相关系数 $R^2$
1	人参皂苷 Re	50-2500	$y=58.82x-699.58$	0.9982
2	人参皂苷 Rd	50-2500	$y=68.10x-476.15$	0.9987
3	人参皂苷 Rg1	10-500	$y=315.64x-230.04$	0.9994
4	丹参酮 I	2-100	$y=6942.05x-7756.57$	0.9948
5	丹参酮 IIA	0.4-20	$y=60606.70x+309.02$	0.9910
6	隐丹参酮	0.4-20	$y=9569.19x-1121.29$	0.9958
7	甘草酸	10-500	$y=319.37x+9432.82$	0.9985
8	甘草苷	10-500	$y=1907.14x-7685.80$	0.9977
9	甘草素	10-500	$y=1566.15x-6280.66$	0.9962
10	染料木素	10-500	$y=565.85x-1146.06$	0.9998
11	大豆苷元	10-500	$y=452.00x-771.18$	0.9989
12	葛根素	10-500	$y=1429.10x-4592.38$	0.9983
13	川芎嗪	2-100	$y=14936.00x-6691.79$	0.9979
14	阿魏酸	10-500	$y=363.62x-696.34$	0.9996
15	蒿本内酯	250-5000	$y=24.64x-1304.02$	0.9986
16	大黄素	1-50	$y=17321.12x-3713.28$	0.9992
17	白藜芦醇	50-2500	$y=121.64x-2402.07$	0.9996
18	虎杖苷	10-500	$y=470.96x-486.01$	0.9967
19	积雪草苷	10-400	$y=246.28x-161.21$	0.9988

序号	化合物	线性范围 (μg/L)	回归方程	相关系数R <sup>2</sup>
20	积雪草苷 B	20-1000	y=376.51x-2182.92	0.9982
21	羟基积雪草苷	20-1000	y=443.42x-3170.56	0.9954
22	异绿原酸 C	10-500	y=1373.87x-1236.56	0.9997
23	异绿原酸 A	10-500	y=2045.24x-5478.81	0.9994
24	绿原酸	10-500	y=1166.53x-1768.97	0.9992
25	芦荟苷	10-500	y=1394.84x-4791.60	0.9973
26	芦荟大黄素	50-2500	y=266.03x-5837.32	0.9970
27	芦荟新苷 D	10-500	y=823.03x-2383.45	0.9972
28	氧化槐果碱	2-100	y=4352.77x-5226.3	0.9921
29	槐果碱	2-100	y=9590.27x-5281.4	0.9925
30	苦参碱	1-50	y=7936.86x-8299.71	0.9916
31	氧化苦参碱	2-100	y=3974.63x-2795.41	0.9952
32	菊苣酸	10-500	y=578.14x-1456.28	0.9968
33	木犀草素	10-500	y=2058.24x-8002.23	0.9985
34	咖啡酸	10-500	y=1806.82x-2682.01	0.9930
35	槲皮素	5-200	y=986.98x-862.54	0.9913
36	山奈酚	50-2500	y=174.79x-1201.06	0.9994
37	芦丁	10-500	y=1581.81x-3543.04	0.9977
38	金丝桃苷	5-250	y=1483.84x-2046.07	0.9983
39	牡荆素葡萄糖苷	10-500	y=1402.22x-4507.56	0.9961
40	牡荆素鼠李糖苷	10-500	y=1061.92x-3586.26	0.9993
41	苯甲酰芍药苷	50-2500	y=204.67x-1411.13	0.9990
42	芍药内酯苷	50-2500	y=100.53x-1678.61	0.9990
43	芍药苷	50-2500	y=207.64x-1169.43	0.9997

表17 人参皂苷Re等43种植物提取物标识组分在乳液类基质中的线性及线性范围

序号	化合物	线性范围 (μg/L)	回归方程	相关系数R <sup>2</sup>
1	人参皂苷 Re	50-2500	y=61.76x-934.36	0.9949
2	人参皂苷 Rd	50-2500	y=73.18x-445.16	0.9991
3	人参皂苷 Rg1	10-500	y=331.43x+636.41	0.9994
4	丹参酮 I	2-100	y=6211.69x-6852.16	0.9963
5	丹参酮 IIA	0.4-20	y=62083.99x-3871.32	0.9908
6	隐丹参酮	0.4-20	y=9196.00x-1317.32	0.9938
7	甘草酸	10-500	y=311.20x+836.90	0.9946
8	甘草苷	10-500	y=2108.57x-6453.58	0.9981
9	甘草素	10-500	y=1621.00x-6380.69	0.9993
10	染料木素	10-500	y=617.99x-1325.55	0.9993
11	大豆苷元	10-500	y=505.50x-811.73	0.9976
12	葛根素	10-500	y=1541.60x-4389.13	0.9988
13	川芎嗪	2-100	y=14292.03x-6145.11	0.9991
14	阿魏酸	10-500	y=366.07x-811.52	0.9998
15	蒿本内酯	250-5000	y=20.48x+234.02	0.9955
16	大黄素	1-50	y=19933.41x-6108.00	0.9992
17	白藜芦醇	50-2500	y=125.13x-2527.75	0.9988
18	虎杖苷	10-500	y=503.10x-1068.20	0.9948
19	积雪草苷	10-400	y=286.93x-2723.88	0.9990
20	积雪草苷 B	20-1000	y=413.44x-1735.00	0.9987
21	羟基积雪草苷	20-1000	y=481.57x-1762.42	0.9988
22	异绿原酸 C	10-500	y=1322.34x+1932.8	0.9990
23	异绿原酸 A	10-500	y=2030.22x+3993.44	0.9940
24	绿原酸	10-500	y=1156.45x+3746.40	0.9900

序号	化合物	线性范围 (μg/L)	回归方程	相关系数R <sup>2</sup>
25	芦荟苷	10-500	y=1416.97x-5850.46	0.9986
26	芦荟大黄素	50-2500	y=274.08x-5381.31	0.9975
27	芦荟新苷 D	10-500	y=941.14x-3119.61	0.9983
28	氧化槐果碱	2-100	y=5576.09x-5080.99	0.9989
29	槐果碱	2-100	y=12589.84x-6010.02	0.9957
30	苦参碱	1-50	y=10008.42x-6260.49	0.9954
31	氧化苦参碱	2-100	y=4313.86x-3764.45	0.9973
32	菊苣酸	10-500	y=585.42x-1276.59	0.9995
33	木犀草素	10-500	y=2146.01x-8476.07	0.9988
34	咖啡酸	10-500	y=1869.89x-2864.00	0.9958
35	槲皮素	5-200	y=1065.11x-1407.56	0.9962
36	山奈酚	50-2500	y=192.24x-613.56	0.9987
37	芦丁	10-500	y=1702.33x-6924.80	0.9986
38	金丝桃苷	5-250	y=1568.08x-2433.84	0.9980
39	牡荆素葡萄糖苷	10-500	y=1460.07x-1711.15	0.9967
40	牡荆素鼠李糖苷	10-500	y=1160.26x-4158.13	0.9977
41	苯甲酰芍药苷	50-2500	y=224.01x-2838.67	0.9991
42	芍药内酯苷	50-2500	y=106.67x-1152.26	0.9999
43	芍药苷	50-2500	y=205.96x-154.69	0.9993

#### 5.4.3 回收率和精密度

分别称取2种基质样品0.5 g (精确到0.0001 g) 置于10 mL具塞比色管中, 按所建立的前处理方法进行处理, 每种基质的高中低浓度分别平行制备六份, 将测得峰面积代入标准曲线计算被测物质的浓度, 再计算被测物质的回收率。回收率结果见表18。实测膏霜基质中人参皂苷Re等43种特征标识组分的回收率为80.3%~123.2%, RSD为0.8%~12.3%; 乳液基质中人参皂苷Re等43种特征标识组分的回收率为84.7%~127.2%, RSD为0.9%~12.9%。综上, 线性范围浓度加标回收率为75%~130%, 相对标准偏差小于15%。

表 18 人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分的回收率和精密度 (n=6)

序号	化合物	加标量 /(mg/kg)	膏霜类		乳液类	
			回收率 /%	RSD /%	回收率 /%	RSD /%
1	人参皂苷 Re	2.0	93.1	6.4	113.7	8.6
		10.0	99.8	3.7	103.2	4.3
		20.0	107.4	3.6	107.1	5.1
2	人参皂苷 Rd	2.0	85.5	6.3	108.8	5.7
		10.0	90.8	4.3	102.2	3.5
		20.0	101.2	4.3	103.5	5.5
3	人参皂苷 Rg1	0.40	118.5	7.6	111.5	9.3
		2.0	89.9	4.7	96.6	5.8
		4.0	97.3	3.5	102.6	4.5
4	丹参酮 I	0.080	106.9	8.9	90.5	8.7
		0.40	92.1	3.6	94.3	6.5
		1.0	88.4	8.9	87.3	2.9
5	丹参酮 IIA	0.020	89.4	4.6	93.3	4.4
		0.080	89.5	1.7	89.1	3.1
		0.20	90.3	1.6	89.5	2.3
6	隐丹参酮	0.020	98.3	9.4	95.2	6.6
		0.080	95.0	4.3	91.3	2.2
		0.2	92.1	3.8	95.8	3.3
7	甘草酸	0.40	95.3	7.2	95.0	9.1
		2.0	101.6	3.5	102.5	4.4
		4.0	103.6	3.7	105.2	4.0
8	甘草苷	0.40	100.6	2.7	103.7	5.3
		2.0	95.2	2.1	102.5	4.7
		4.0	100.9	2.6	104.5	4.3
9	甘草素	0.40	95.7	5.4	104.4	6.2
		2.0	94.1	3.7	100.7	2.4
		4.0	98.5	2.0	104.6	4.1
10	染料木素	0.40	108.9	5.6	106.4	6.6
		2.0	92.7	6.7	106.3	4.1
		4.0	98.5	5.4	108.2	4.7

序号	化合物	加标量 (mg/kg)	膏霜类		乳液类	
			回收率 /%	RSD /%	回收率 /%	RSD /%
11	大豆苷元	0.40	93.2	9.9	109.1	8.2
		2.0	99.4	7.1	101.4	7.5
		4.0	102.8	4.2	103.6	4.9
12	葛根素	0.40	104.7	2.3	100.2	3.9
		2.0	100.8	2.4	107.0	4.8
		4.0	100.7	1.4	105.6	3.8
13	川芎嗪	0.10	99.5	2.3	95.5	3.1
		0.40	91.9	2.1	89.7	2.4
		1.0	85.0	1.1	87.9	0.9
14	阿魏酸	0.40	91.4	6.8	107.7	7.8
		2.0	99.1	3.1	104.9	5.5
		4.0	100.1	3.8	106.3	4.3
15	蒿本内酯	5.0	87.4	12.3	109.9	8.5
		20.0	91.5	5.3	101.9	3.4
		50.0	80.3	3.0	86.5	5.2
16	大黄素	0.040	99.9	7.2	107.8	7.1
		0.20	100.3	9.2	107.8	4.5
		0.40	101.8	5.2	103.8	6.9
17	白藜芦醇	2.0	98.2	7.6	105.0	7.2
		10.0	93.4	2.5	109.3	4.6
		20.0	101.8	4.7	105.2	4.2
18	虎杖苷	0.40	87.9	5.9	112.4	8.9
		2.0	100.8	4.5	104.9	4.0
		4.0	102.7	3.2	106.7	4.0
19	积雪草苷	0.80	98.8	8.8	95.8	11.3
		4.0	96.8	5.9	94.2	6.1
		8.0	106.9	1.3	105.3	6.5
20	积雪草苷 B	0.80	117.6	7.3	121.5	3.7
		4.0	99.2	3.5	94.0	3.9
		8.0	98.1	1.6	107.7	5.5
21	羟基积雪草苷	0.80	96.2	4.3	108.3	7.9
		4.0	93.9	4.7	109.9	5.3

序号	化合物	加标量 (mg/kg)	膏霜类		乳液类	
			回收率 /%	RSD /%	回收率 /%	RSD /%
		8.0	103.2	4.3	107.3	4.9
22	异绿原酸 C	0.40	106.8	3.9	117.6	7.5
		2.0	99.6	1.8	111.2	3.5
		4.0	104.7	2.6	112.5	4.1
23	异绿原酸 A	0.40	99.6	4.3	110.6	7.1
		2.0	99.8	1.5	111.3	4.8
		4.0	100.7	2.0	108.9	3.6
24	绿原酸	0.40	105.0	3.1	115.1	12.9
		2.0	100.4	1.5	112.6	8.1
		4.0	104.9	1.9	111.6	3.9
25	芦荟苷	0.40	103.0	6.7	106.2	3.1
		2.0	96.8	3.0	100.0	4.0
		4.0	103.7	0.8	105.1	2.3
26	芦荟大黄素	2.0	93.3	2.5	105.7	8.3
		10.0	97.3	3.1	104.7	2.6
		20.0	102.6	2.1	104.7	3.9
27	芦荟新苷 D	0.40	102.4	3.3	112.6	4.5
		2.0	101.4	2.2	103.7	3.4
		4.0	98.4	2.4	108.6	4.1
28	氧化槐果碱	0.10	96.3	8.6	96.4	2.9
		0.40	92.0	3.7	90.5	2.9
		1.0	83.0	2.3	90.0	1.2
29	槐果碱	0.10	91.8	4.6	92.8	3.6
		0.40	88.4	2.3	92.6	2.2
		1.0	86.3	1.3	86.0	1.6
30	苦参碱	0.10	97.9	5.1	89.4	3.6
		0.40	96.8	4.0	93.4	3.3
		1.0	92.5	3.0	88.5	2.0
31	氧化苦参碱	0.10	87.9	6.7	91.4	7.0
		0.40	90.4	2.8	90.2	3.3
		1.0	82.2	1.5	84.7	2.5
		0.40	112.9	9.0	107.0	7.0

序号	化合物	加标量 (mg/kg)	膏霜类		乳液类	
			回收率 /%	RSD /%	回收率 /%	RSD /%
32	苜蓿酸	2.0	100.9	4.9	103.5	5.9
		4.0	100.1	4.0	110.6	4.4
		0.40	104.8	7.7	107.3	5.1
33	木犀草素	2.0	95.7	6.1	103.2	8.9
		4.0	97.7	5.3	101.4	6.1
		0.40	100.1	3.6	103.6	4.4
34	咖啡酸	2.0	97.0	2.1	105.7	2.9
		4.0	101.3	1.6	106.1	4.4
		0.40	110.0	6.6	102.7	5.8
35	槲皮素	2.0	123.2	7.1	127.2	5.6
		4.0	109.2	6.7	126.9	6.9
		2.0	100.6	6.7	105.3	4.1
36	山奈酚	10.0	98.6	4.7	106.1	6.8
		20.0	102.3	6.9	104.1	5.5
		0.40	104.0	3.3	116.3	7.0
37	芦丁	2.0	97.1	2.5	106.1	3.1
		4.0	101.6	2.9	102.9	3.0
		0.20	102.1	5.2	113.4	8.2
38	金丝桃苷	1.0	99.4	5.7	100.9	7.0
		2.0	103.1	3.3	106.0	4.4
		0.40	103.5	3.2	105.1	2.9
39	牡荆素葡萄糖苷	2.0	97.2	1.5	102.9	3.4
		4.0	100.9	1.2	106.5	3.9
		0.40	99.7	3.4	115.9	8.7
40	牡荆素鼠李糖苷	2.0	98.4	2.2	98.8	3.8
		4.0	101.0	1.9	103.0	3.4
		2.0	102.0	4.9	107.6	3.4
41	苯甲酰芍药苷	10.0	100.8	2.2	100.4	4.5
		20.0	100.6	3.7	108.3	3.6
		2.0	102.3	4.0	110.4	5.3
42	芍药内酯苷	10.0	96.4	2.4	106.1	2.5
		20.0	102.3	1.6	105.5	4.2

序号	化合物	加标量 (mg/kg)	膏霜类		乳液类	
			回收率 /%	RSD /%	回收率 /%	RSD /%
43	芍药苷	2.0	107.8	4.2	106.1	2.7
		10.0	101.4	1.7	103.6	3.7
		20.0	104.2	2.6	108.0	3.4

## 5.5 机构 D 试验分析

本方法验证结果由广州汇标检测技术中心验证。选择基质较为复杂的乳液和膏霜两种化妆品作为代表性基质，对所建立方法进行了验证。验证项目为检测限、定量限、线性与范围、准确度、精密性等。

### 5.5.1 检测限及定量限

本标准方法中人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分的检测限、定量下限及取样量为 0.5 g 时的检出浓度和最低定量浓度见表 19。结果表明，人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分的检测限为 0.13~83  $\mu\text{g/L}$ ；定量下限为 0.40~250  $\mu\text{g/L}$ ；检出浓度为 0.0026~1.7 mg/kg；最低定量浓度为 0.008~5.0 mg/kg。

表 19 人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分的检出限、定量下限、检出浓度和最低定量浓度

序号	组分名称	检出限 ( $\mu\text{g/L}$ )	定量下限 ( $\mu\text{g/L}$ )	检出浓度 (mg/kg)	最低定量浓度 (mg/kg)
1	人参皂苷 Re	17	50	0.33	1.0
2	人参皂苷 Rd	17	50	0.33	1.0
3	人参皂苷 Rg1	3.3	10	0.067	0.20
4	丹参酮 I	0.67	2.0	0.013	0.040
5	丹参酮 IIA	0.13	0.40	0.0026	0.0080
6	隐丹参酮	0.13	0.40	0.0026	0.0080
7	甘草酸	3.3	10	0.067	0.20
8	甘草苷	3.3	10	0.067	0.20
9	甘草素	3.3	10	0.067	0.20
10	染料木素	3.3	10	0.067	0.20
11	大豆苷元	3.3	10	0.067	0.20

序号	组分名称	检出限 ( $\mu\text{g/L}$ )	定量下限 ( $\mu\text{g/L}$ )	检出浓度 ( $\text{mg/kg}$ )	最低定量浓度 ( $\text{mg/kg}$ )
12	葛根素	3.3	10	0.067	0.20
13	川芎嗪	0.67	2.0	0.013	0.040
14	阿魏酸	3.3	10	0.067	0.20
15	蒿本内酯	83	250	1.7	5.0
16	大黄素	0.33	1.0	0.0067	0.020
17	白藜芦醇	17	50	0.33	1.0
18	虎杖苷	3.3	10	0.067	0.20
19	积雪草苷	3.3	10	0.067	0.20
20	积雪草苷 B	6.7	20	0.13	0.40
21	羟基积雪草苷	6.7	20	0.13	0.40
22	异绿原酸 C	3.3	10	0.067	0.20
23	异绿原酸 A	3.3	10	0.067	0.20
24	绿原酸	3.3	10	0.067	0.20
25	芦荟苷	3.3	10	0.067	0.20
26	芦荟大黄素	17	50	0.33	1.0
27	芦荟新苷 D	3.3	10	0.067	0.20
28	氧化槐果碱	0.67	2.0	0.013	0.040
29	槐果碱	0.67	2.0	0.013	0.040
30	苦参碱	0.33	1.0	0.0067	0.020
31	氧化苦参碱	0.67	2.0	0.013	0.040
32	菊苣酸	3.3	10	0.067	0.20
33	木犀草素	3.3	10	0.067	0.20
34	咖啡酸	3.3	10	0.067	0.20
35	槲皮素	1.7	5.0	0.033	0.10
36	山奈酚	17	50	0.33	1.0
37	芦丁	3.3	10	0.067	0.20

序号	组分名称	检出限 ( $\mu\text{g/L}$ )	定量下限 ( $\mu\text{g/L}$ )	检出浓度 ( $\text{mg/kg}$ )	最低定量浓度 ( $\text{mg/kg}$ )
38	金丝桃苷	1.7	5.0	0.033	0.10
39	牡荆素葡萄糖苷	3.3	10	0.067	0.20
40	牡荆素鼠李糖苷	3.3	10	0.067	0.20
41	苯甲酰芍药苷	17	50	0.33	1.0
42	芍药内酯苷	17	50	0.33	1.0
43	芍药苷	17	50	0.33	1.0

### 5.5.2 线性及线性范围

用空白基质提取液将人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分稀释成系列混合标准溶液，按所建方法中色谱-质谱条件进行测定，以人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分的浓度为横坐标，峰面积为纵坐标，进行曲线绘制分析，得到线性回归方程和线性相关系数 ( $R^2$ )，详见表 20~表 21。结果表明，人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分在各自质量浓度范围内线性关系良好，相关系数  $R^2$  均大于 0.99。

表20 人参皂苷Re等43种植物提取物标识组分在膏霜类基质中的线性及线性范围

序号	化合物	线性范围 ( $\mu\text{g/L}$ )	回归方程	相关系数 $R^2$
1	人参皂苷 Re	50-2500	$y=41.06x+15.93$	0.9979
2	人参皂苷 Rd	50-2500	$y=30.09x+254.00$	0.9969
3	人参皂苷 Rg1	10-500	$y=150.98x+185.40$	0.9980
4	丹参酮 I	2-100	$y=9313.13x-5357.38$	0.9996
5	丹参酮 IIA	0.4-20	$y=67529.16x-9737.96$	0.9975
6	隐丹参酮	0.4-20	$y=24922.60x-3986.29$	0.9932
7	甘草酸	10-500	$y=197.70x+586.29$	0.9989
8	甘草苷	10-500	$y=1813.36x-8342.33$	0.9957
9	甘草素	10-500	$y=1309.27x-3502.07$	0.9971
10	染料木素	10-500	$y=508.18x-974.49$	0.9997
11	大豆苷元	10-500	$y=545.67x-361.78$	0.9991

序号	化合物	线性范围 (μg/L)	回归方程	相关系数R <sup>2</sup>
12	葛根素	10-500	y=1245.72x-4840.85	0.9935
13	川芎嗪	2-100	y=14973.75x-7379.38	0.9996
14	阿魏酸	10-500	y=162.68x-603.72	0.9963
15	蒿本内酯	250-5000	y=12.30x+296.05	0.9976
16	大黄素	1-50	y=10310.29x-585.34	0.9984
17	白藜芦醇	50-2500	y=76.31x-1766.50	0.9970
18	虎杖苷	10-500	y=333.69x-1124.08	0.9973
19	积雪草苷	10-400	y=96.57x+487.21	0.9942
20	积雪草苷 B	20-1000	y=65.49x+1718.24	0.9950
21	羟基积雪草苷	20-1000	y=81.75x+1309.06	0.9927
22	异绿原酸 C	10-500	y=629.39x-391.39	0.9995
23	异绿原酸 A	10-500	y=626.55x-1590.38	0.9960
24	绿原酸	10-500	y=1230.06x-3017.23	0.9990
25	芦荟苷	10-500	y=1022.94x-3091.14	0.9979
26	芦荟大黄素	50-2500	y=125.72x-3195.25	0.9903
27	芦荟新苷 D	10-500	y=478.46x+1051.56	0.9981
28	氧化槐果碱	2-100	y=5655.88x-4461.49	0.9974
29	槐果碱	2-100	y=23179.96x-17114.51	0.9992
30	苦参碱	1-50	y=9741.67x-2998.07	0.9955
31	氧化苦参碱	2-100	y=2225.34x-2687.94	0.9953
32	菊苣酸	10-500	y=423.52x-723.99	0.9981
33	木犀草素	10-500	y=1836.95x-11306.69	0.9954
34	咖啡酸	10-500	y=1829.43x-8603.00	0.9946
35	槲皮素	5-200	y=842.90x-476.25	0.9918
36	山奈酚	50-2500	y=139.35x-2209.73	0.9981
37	芦丁	10-500	y=1136.84x-4725.29	0.9968

序号	化合物	线性范围 (μg/L)	回归方程	相关系数R <sup>2</sup>
38	金丝桃苷	5-250	y=969.67x-2172.67	0.9953
39	牡荆素葡萄糖苷	10-500	y=872.32x-2124.44	0.9956
40	牡荆素鼠李糖苷	10-500	y=814.59x-1684.76	0.9961
41	苯甲酰芍药苷	50-2500	y=66.94x+582.46	0.9992
42	芍药内酯苷	50-2500	y=21.45x-0.91	0.9979
43	芍药苷	50-2500	y=42.59x-651.91	0.9988

表21 人参皂苷Re等43种植物提取物标识组分在乳液类基质中的线性及线性范围

序号	化合物	线性范围 (μg/L)	回归方程	相关系数R <sup>2</sup>
1	人参皂苷 Re	50-2500	y=91.53x-1507.30	0.9969
2	人参皂苷 Rd	50-2500	y=150.43x-3420.36	0.9960
3	人参皂苷 Rg1	10-500	y=295.17x-1329.87	0.9948
4	丹参酮 I	2-100	y=8207.57x-5693.23	0.9973
5	丹参酮 IIA	0.4-20	y=54040.30x-7455.24	0.9975
6	隐丹参酮	0.4-20	y=22629.21x-4575.16	0.9923
7	甘草酸	10-500	y=1278.64x+1866.60	0.9967
8	甘草苷	10-500	y=2866.91x-13258.28	0.9943
9	甘草素	10-500	y=2656.06x-10524.46	0.9970
10	染料木素	10-500	y=1077.43x-2811.67	0.9987
11	大豆苷元	10-500	y=1049.35x-2923.23	0.9982
12	葛根素	10-500	y=1742.94x-6976.64	0.9960
13	川芎嗪	2-100	y=15120.17x-8432.74	0.9993
14	阿魏酸	10-500	y=300.02x+29248.19	0.9954
15	蒿本内酯	250-5000	y=10.40x+386.33	0.9944
16	大黄素	1-50	y=32815.56x-4985.72	0.9992
17	白藜芦醇	50-2500	y=157.49x-3388.74	0.9957

序号	化合物	线性范围 (μg/L)	回归方程	相关系数R <sup>2</sup>
18	虎杖苷	10-500	y=504.84x-1441.08	0.9963
19	积雪草苷	10-400	y=1523.85x-5610.92	0.9949
20	积雪草苷 B	20-1000	y=1450.40x-13847.23	0.9951
21	羟基积雪草苷	20-1000	y=1483.36x-13279.10	0.9954
22	异绿原酸 C	10-500	y=76.02x-330.95	0.9944
23	异绿原酸 A	10-500	y=270.32x-1176.07	0.9957
24	绿原酸	10-500	y=5885.02x-28458.22	0.9973
25	芦荟苷	10-500	y=1480.53x-4296.93	0.9978
26	芦荟大黄素	50-2500	y=91.21x-1789.54	0.9975
27	芦荟新苷 D	10-500	y=1095.37x-4716.85	0.9901
28	氧化槐果碱	2-100	y=3070.14x-2558.22	0.9965
29	槐果碱	2-100	y=24215.22x-18605.54	0.9991
30	苦参碱	1-50	y=11472.06x-4956.47	0.9976
31	氧化苦参碱	2-100	y=3083.81x-2472.49	0.9949
32	菊苣酸	10-500	y=455.89x-1936.16	0.9974
33	木犀草素	10-500	y=4545.69x-12778.79	0.9990
34	咖啡酸	10-500	y=2070.26x-13895.77	0.9954
35	槲皮素	5-200	y=879.77x-1429.50	0.9969
36	山奈酚	50-2500	y=210.39x-1795.04	0.9991
37	芦丁	10-500	y=1951.71x-9682.63	0.9948
38	金丝桃苷	5-250	y=1296.58x-2762.07	0.9949
39	牡荆素葡萄糖苷	10-500	y=1270.17x-4044.15	0.9943
40	牡荆素鼠李糖苷	10-500	y=1226.68x-5401.80	0.9947
41	苯甲酰芍药苷	50-2500	y=239.85x-4777.14	0.9974
42	芍药内酯苷	50-2500	y=35.86x-709.95	0.9984
43	芍药苷	50-2500	y=80.10x-1071.20	0.9965

### 5.5.3 回收率和精密度

分别称取2种基质样品0.5 g（精确到0.0001 g）置于10 mL具塞比色管中，按所建立的前处理方法进行处理，每种基质的高中低浓度分别平行制备六份，将测得峰面积代入标准曲线计算被测物质的浓度，再计算被测物质的回收率。回收率结果见表22。实测膏霜基质中人参皂苷Re等43种特征标识组分的回收率为80.7%~123.1%，RSD为1.1%~14.3%；乳液基质中人参皂苷Re等43种特征标识组分的回收率为79.0%~110.9%，RSD为0.6%~10.8%。综上，线性范围浓度加标回收率为75%~130%，相对标准偏差小于15%。

表 22 人参皂苷 Re 等 43 种植物提取物标识组分的回收率和精密度 (n=6)

序号	化合物	加标量 (mg/kg)	膏霜类		乳液类	
			回收率 /%	RSD /%	回收率 /%	RSD /%
1	人参皂苷 Re	2.0	114.2	5.1	107.2	3.8
		10.0	123.1	10.3	98.1	5.2
		20.0	105.4	8.3	92.1	3.7
2	人参皂苷 Rd	2.0	87.4	6.7	95.8	4.5
		10.0	112.0	4.2	102.3	4.0
		20.0	100.1	7.0	94.2	2.5
3	人参皂苷 Rgl	0.40	87.2	3.7	108.1	7.0
		2.0	112.4	3.7	96.3	6.8
		4.0	102.1	8.9	93.2	3.9
4	丹参酮 I	0.10	81.5	7.8	98.2	4.7
		0.40	88.1	1.8	86.2	3.1
		1.0	89.7	2.4	99.7	3.7
5	丹参酮 IIA	0.020	83.3	6.6	92.4	5.2
		0.080	95.9	1.6	99.2	1.6
		0.20	93.1	1.1	98.4	4.0
6	隐丹参酮	0.020	101.2	5.1	93.4	7.6
		0.080	113.5	4.0	106.7	5.7
		0.20	90.4	5.2	104.5	8.3
7	甘草酸	0.40	98.0	3.8	100.0	2.4
		2.0	112.5	4.5	99.6	3.3
		4.0	106.7	2.7	96.2	2.2
8	甘草苷	0.40	95.9	2.6	100.5	3.1

序号	化合物	加标量 (mg/kg)	膏霜类		乳液类	
			回收率 /%	RSD /%	回收率 /%	RSD /%
		2.0	111.7	2.0	97.2	1.5
		4.0	106.1	2.1	96.0	1.7
		0.40	96.2	5.1	95.5	3.3
9	甘草素	2.0	117.0	1.6	99.6	2.9
		4.0	109.4	2.5	95.2	0.6
		0.40	96.6	6.6	99.7	3.3
10	染料木素	2.0	106.0	2.1	98.8	2.7
		4.0	105.5	1.7	96.1	1.2
		0.40	97.6	4.4	96.2	1.4
11	大豆苷元	2.0	111.5	2.6	96.3	2.8
		4.0	110.4	3.5	96.9	2.2
		0.40	97.3	2.3	99.3	3.2
12	葛根素	2.0	109.3	2.7	97.4	1.4
		4.0	100.7	1.9	94.3	1.7
		0.10	94.9	3.0	96.1	3.4
13	川芎嗪	0.40	94.2	3.2	91.5	2.1
		1.0	89.4	1.1	93.1	1.2
		0.40	93.5	7.6	86.2	6.9
14	阿魏酸	2.0	116.0	3.2	95.1	5.3
		4.0	102.9	4.3	95.6	3.1
		5.0	99.7	9.7	92.3	7.8
15	蒿本内酯	20.0	94.6	5.0	91.2	5.6
		50.0	94.4	7.6	79.0	1.9
		0.040	98.9	2.9	99.1	4.0
16	大黄素	0.20	107.6	5.8	98.3	1.3
		0.40	105.4	1.5	97.3	1.5
		2.0	104.1	4.9	100.4	6.2
17	白藜芦醇	10.0	111.3	4.1	100.8	4.2
		20.0	109.1	4.9	98.2	2.7
		0.40	100.6	8.6	101.7	1.8
18	虎杖苷	2.0	113.9	4.3	96.3	2.8
		4.0	105.9	2.6	96.6	1.5

序号	化合物	加标量 (mg/kg)	膏霜类		乳液类	
			回收率 /%	RSD /%	回收率 /%	RSD /%
19	积雪草苷	0.80	88.8	14.3	98.1	4.3
		2.0	80.7	5.6	97.2	9.0
		8.0	106.3	10.1	95.8	2.6
20	积雪草苷 B	0.80	90.1	9.7	99.4	3.7
		4.0	88.6	9.8	100.8	1.3
		8.0	97.3	10.4	98.5	2.3
21	羟基积雪草苷	0.80	100.5	5.5	99.9	5.4
		4.0	97.4	12.5	100.3	1.9
		8.0	107.2	8.7	96.6	1.3
22	异绿原酸 C	0.40	97.2	5.0	102.4	10.2
		2.0	115.7	2.5	96.8	2.6
		4.0	101.5	5.4	96.7	3.8
23	异绿原酸 A	0.40	102.5	5.0	102.4	5.3
		2.0	114.5	2.9	98.9	3.7
		4.0	100.4	3.8	94.0	2.2
24	绿原酸	0.40	119.0	5.8	97.6	3.3
		2.0	113.7	4.0	98.2	3.2
		4.0	109.7	1.4	95.5	1.9
25	芦荟苷	0.40	96.5	5.2	106.6	3.1
		2.0	112.5	3.4	100.7	2.0
		4.0	104.3	3.4	95.5	1.0
26	芦荟大黄素	2.0	106.5	3.2	97.5	4.5
		10.0	108.7	3.0	101.4	2.2
		20.0	102.2	4.6	96.3	1.8
27	芦荟新苷 D	0.40	90.9	5.4	106.8	3.0
		2.0	109.4	4.0	101.8	4.0
		4.0	103.8	4.1	99.2	1.9
28	氧化槐果碱	0.10	85.9	2.8	95.1	4.3
		0.40	84.4	3.8	102.2	4.7
		1.0	87.8	2.5	92.3	4.5
29	槐果碱	0.10	87.9	2.4	88.1	1.8
		0.40	91.8	2.7	92.3	2.2

序号	化合物	加标量 (mg/kg)	膏霜类		乳液类	
			回收率 /%	RSD /%	回收率 /%	RSD /%
		1.0	87.0	1.1	93.8	1.1
30	苦参碱	0.10	89.5	2.8	93.9	2.9
		0.40	90.3	2.1	91.8	3.1
		1.0	91.0	2.8	94.5	2.2
31	氧化苦参碱	0.10	94.0	4.3	98.3	10.8
		0.40	88.9	1.9	106.8	5.8
		1.0	85.8	2.3	99.0	4.2
32	菊苣酸	0.40	99.4	6.2	106.9	4.3
		2.0	105.9	3.7	95.6	5.1
		4.0	103.2	1.5	91.1	3.1
33	木犀草素	0.40	108.1	4.8	101.6	2.1
		2.0	111.2	5.4	96.9	2.2
		4.0	104.7	2.5	98.7	1.1
34	咖啡酸	0.40	111.2	5.4	96.9	2.2
		2.0	115.4	3.3	96.8	3.3
		4.0	104.5	1.5	95.7	2.2
35	槲皮素	0.40	109.4	3.4	98.1	4.3
		2.0	100.8	4.6	102.2	2.4
		4.0	121.8	8.5	95.4	2.2
36	山奈酚	2.0	91.5	4.1	95.6	2.8
		10.0	109.9	3.6	99.8	2.5
		20.0	110.8	3.3	98.2	1.5
37	芦丁	0.40	102.6	4.9	102.1	5.3
		2.0	110.0	2.8	95.7	2.8
		4.0	98.5	5.8	96.3	1.3
38	金丝桃苷	0.20	100.6	4.8	105.9	3.8
		1.0	114.8	3.6	101.1	2.7
		2.0	97.4	4.4	99.7	2.2
39	牡荆素葡萄糖苷	0.40	95.4	2.9	94.1	3.4
		2.0	115.7	2.0	100.1	2.6
		4.0	99.5	2.0	97.3	2.6
	牡荆素鼠李糖苷	0.40	112.6	4.8	96.0	4.3

序号	化合物	加标量 (mg/kg)	膏霜类		乳液类	
			回收率 /%	RSD /%	回收率 /%	RSD /%
40		2.0	110.6	4.5	97.4	1.4
		4.0	104.4	4.5	97.1	1.5
41	苯甲酰芍药苷	2.0	88.8	11.1	110.5	6.1
		10.0	111.7	10.8	97.1	3.3
		20.0	112.3	4.0	95.7	2.6
42	芍药内酯苷	2.0	99.6	9.9	88.5	4.4
		10.0	118.9	3.8	99.2	3.7
		20.0	100.4	2.8	94.7	1.6
43	芍药苷	2.0	97.3	4.6	94.4	3.2
		10.0	105.9	4.8	98.2	2.4
		20.0	111.3	3.6	96.6	1.7

## 六、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

## 七、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制订，可为广大化妆品行业的检测机构和企业用户提供一种快捷简便、准确高效的测定方法；对于保证化妆品质量，保障消费者的身心健康，以及完善化妆品检验标准体系，都具有重要意义。通过制订该标准，可以更好地为行业、企业服务，有利于产业结构调整和升级。

## 八、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

## 九、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 十、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

---

## 十一、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布 3 个月后实施。

## 十二、废止现行相关标准的建议

该标准属于首次发布的推荐性标准，未替代现有的标准。

## 十三、其他应予说明的事项

无。